



Guia do desenvolvedor

# Amazon Comprehend Medical



# Amazon Comprehend Medical: Guia do desenvolvedor

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não são propriedade da Amazon pertencem aos respectivos proprietários, os quais podem ou não ser afiliados, estar conectados ou ser patrocinados pela Amazon.

---

# Table of Contents

O que é Amazon Comprehend Medical? .....	1
Aviso importante .....	1
Casos de uso do Amazon Comprehend Medical .....	1
Benefícios do Amazon Comprehend Medical .....	2
Conformidade com a HIPAA .....	3
Acessar o Amazon Comprehend Medical .....	3
Como começar a usar o Amazon Comprehend Medical .....	4
Como funciona .....	5
Detecção síncrona de entidades .....	5
Análise assíncrona de lotes .....	5
Vinculação de ontologias .....	6
Vinculação a conceitos na base de conhecimento de condições médicas do ICD-10-CM	
Vinculação a conceitos na base de RxNorm conhecimento de medicamentos .....	6
Vinculação a conceitos na base de conhecimento de condições médicas do SNOMED CT .....	7
Conceitos básicos .....	8
Inscreva-se para um Conta da AWS .....	8
Etapa 1: configurar o AWS CLI .....	8
Próxima etapa .....	9
Etapa 2: Conceitos básicos do uso do console .....	9
Analisar o texto clínico usando o console .....	9
Etapa 3: Começando a usar a API .....	12
Detectando entidades médicas usando o AWS Command Line Interface .....	12
Detectando entidades médicas usando o AWS SDK para Java .....	14
Detectando entidades médicas usando o AWS SDK para Python (Boto) .....	15
Endpoints da VPC (AWS PrivateLink) .....	17
Considerações sobre endpoints da VPC do Amazon Comprehend Medical .....	17
Criar um endpoint da VPC de interface para o Amazon Comprehend Medical .....	17
Criar um endpoint da VPC de interface para o Amazon Comprehend Medical .....	18
Análise de texto APIs .....	19
Detectar entidades (versão 2) .....	19
Categoria da anatomia .....	21
Categoria de saúde comportamental, ambiental e social .....	21
Categoria da condição médica .....	22
Categoria do medicamento .....	23

Categoria de Informações de Saúde Protegidas .....	24
Categoria de teste, tratamento e procedimento .....	25
Categoria de expressão de tempo .....	26
Detectar PHI .....	27
Lote de análise de texto APIs .....	31
Aviso importante .....	1
Executando a análise em lote usando o APIs .....	32
Executar análise em lote usando o console .....	33
Políticas do IAM .....	33
Arquivos de saída de análise em lote .....	35
Vinculação de ontologias APIs .....	38
Inferir CM ICD10 .....	38
Categoria do ICD-10-CM .....	38
Tipos do ICD-10-CM .....	39
Características do ICD-10-CM .....	39
Atributos do ICD-10-CM .....	39
Categoria de expressão de tempo .....	39
Tipos .....	40
Tipo de relacionamento .....	40
Exemplos de entrada e resposta .....	40
InferRxNorm .....	43
Aviso importante .....	1
RxNorm categoria .....	44
RxNorm tipos .....	44
RxNorm atributos .....	44
RxNorm traços .....	44
Exemplos de entrada e resposta .....	45
InferSNOMEDCT .....	47
Categoria da anatomia .....	48
Categoria da condição médica .....	49
Categoria de teste, tratamento e procedimento .....	50
Detalhes do SNOMED CT .....	51
Exemplos de entrada e resposta .....	51
Vinculação de ontologias a análises em lote .....	58
Realizar a análise em lote .....	59
Políticas do IAM .....	60

Arquivos de saída de análise em lote .....	62
Segurança .....	65
Proteção de dados .....	66
Autenticação e controle de acesso .....	67
Autenticação .....	67
Controle de acesso .....	68
Visão geral do gerenciamento de acesso .....	68
Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para o Amazon Comprehend Medical .....	72
Referência de permissões da API do Amazon Comprehend Medical .....	80
AWS políticas gerenciadas .....	80
CloudTrail troncos .....	82
Informações do Amazon Comprehend Medical em CloudTrail .....	82
Noções básicas sobre entradas do arquivo de log do Amazon Comprehend Medical .....	84
Validação de conformidade .....	85
Resiliência .....	86
Segurança da infraestrutura .....	86
Diretrizes e cotas .....	87
Aviso importante .....	87
Regiões compatíveis .....	87
Controle de utilização .....	87
Cotas gerais .....	88
Perguntas frequentes sobre protocolos compatíveis .....	93
Quais são os AWS Protocolos JSON e Smithy RPC v2 CBOR, e como eles diferem? .....	93
Como faço para começar a usar o protocolo Smithy RPC v2 CBOR? .....	93
Quais são os riscos de ativar o protocolo Smithy RPC v2 CBOR? .....	94
E se minha solução não for compatível com o Smithy RPC v2 CBOR? .....	94
O que AWS As regiões oferecem suporte ao protocolo Smithy RPC v2 CBOR? .....	94
Quais melhorias de latência posso esperar ao atualizar para versões do SDK compatíveis com o Smithy RPC v2 CBOR? .....	95
Será que o AWS O protocolo JSON está obsoleto? .....	95
Onde posso encontrar mais informações sobre o Smithy RPC v2 CBOR? .....	95
Histórico do documento .....	96
Log de alterações do Amazon Comprehend Medical .....	107
Versão atualizada da API para DetectEntities V2 .....	107
Versão atualizada da API para DetectEntities .....	107

Versão atualizada da API para InferICD10CM .....	107
Versão atualizada da API para InferRxNorm .....	107
Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT .....	107
Versão atualizada da API para InferICD10CM .....	108
Versão atualizada da API para InferRxNorm .....	108
Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT .....	108
Versão atualizada da API para InferICD10CM .....	108
Versão atualizada da API para InferRxNorm .....	108
Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT .....	109
Versão atualizada da API para DetectEntities .....	109
Versão atualizada da API para DetectEntities V2 .....	109
Versão atualizada da API para InferRxNorm .....	109
Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT .....	109
Versão atualizada da API para InferICD10CM .....	110
Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical .....	110
Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical .....	110
Mudanças na operação da API Amazon Comprehend Medical .....	110
Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical .....	111
Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical .....	111
Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical .....	111
Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical .....	111
Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical .....	112
Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical .....	112
Mudanças nas operações da API InferSNOMEDCT do Amazon Comprehend Medical .....	112
Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical .....	113
.....	cxviii

# O que é Amazon Comprehend Medical?

O Amazon Comprehend Medical detecta e retorna informações úteis em textos clínicos não estruturados, como anotações médicas, resumos de alta, resultados de exames, notas de casos e assim por diante. O Amazon Comprehend Medical usa modelos de processamento de linguagem natural (PLN) para detectar entidades, que são referências textuais a informações médicas, como condições médicas, medicamentos ou Informações de Saúde Protegidas (PHI). Para ver uma lista completa de entidades detectadas, consulte [Detectar entidades \(versão 2\)](#). O Amazon Comprehend Medical também permite que os usuários vinculem essas entidades detectadas a bases de conhecimento médico padronizadas, como o ICD-10-CM, por meio de operações de vinculação de RxNorm ontologias.

As informações neste guia do desenvolvedor são destinadas a desenvolvedores de aplicativos. Este guia inclui informações sobre o uso programático do Amazon Comprehend Medical por meio do AWS CLI ou do Amazon Comprehend Medical. APIs

Os preços do Amazon Comprehend Medical são diferentes dos preços do Amazon Comprehend. Para obter mais informações, consulte [Preços do Amazon Comprehend Medical](#).

Idiomas compatíveis

O Amazon Comprehend Medical só detecta entidades médicas em textos em inglês (US-EN).

## Aviso importante

O Amazon Comprehend Medical não é um substituto para aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico profissional. O Amazon Comprehend Medical fornece pontuações de confiança que indicam o nível de confiança na precisão das entidades detectadas. Identifique o limite de confiança certo para seu caso de uso e use limites de alta confiança em situações que exigem alta precisão. Em certos casos de uso, os resultados devem ser revisados e verificados por revisores humanos devidamente treinados. Por exemplo, o Amazon Comprehend Medical só deve ser usado em cenários de atendimento ao paciente após uma revisão que assegure a precisão e uma opinião médica confiável por profissionais médicos treinados.

## Casos de uso do Amazon Comprehend Medical

Você pode usar o Amazon Comprehend Medical para os seguintes aplicativos de saúde:

- Gerenciamento e resultados de casos de pacientes: médicos e profissionais de saúde podem gerenciar e acessar facilmente informações médicas que não se encaixam nos formulários tradicionais. Os pacientes podem relatar seus problemas de saúde em uma narrativa com mais informações do que os formatos padrão. Ao analisar as notas dos casos, os profissionais podem identificar candidatos para o exame precoce de condições médicas antes que a condição se torne mais difícil e cara de tratar.
- Pesquisa clínica: as organizações de ciências biológicas e de pesquisa podem otimizar o processo de correspondência para inscrever pacientes em ensaios clínicos. Ao usar o Amazon Comprehend Medical para detectar informações pertinentes em textos clínicos, os pesquisadores podem melhorar a farmacovigilância, realizar vigilância pós-comercialização para monitorar eventos adversos de medicamentos e avaliar a eficácia terapêutica detectando facilmente informações vitais em notas de acompanhamento e outros textos clínicos. Por exemplo, pode ser mais fácil e eficaz monitorar como os pacientes respondem a determinadas terapias analisando suas narrativas.
- Faturamento médico e gerenciamento do ciclo de receita de saúde: os pagadores podem expandir suas análises para incluir documentos não estruturados, como notas clínicas. Mais informações sobre um diagnóstico podem ser analisadas e usadas para ajudar a determinar os códigos de cobrança apropriados a partir de documentos não estruturados. O processamento de linguagem natural (PLN) é o componente mais crítico da codificação assistida por computador (CAC). O Amazon Comprehend Medical usa os últimos avanços em PLN para analisar textos clínicos, ajudando a diminuir o tempo de geração de receita e a melhorar a precisão do reembolso.
- Vinculação de ontologias: use os recursos de vinculação de ontologias para detectar entidades do texto clínico e vincular essas entidades a conceitos padronizados em ontologias médicas comuns. Infer ICD10CM identifica possíveis condições médicas como entidades. O Infer ICD10CM vincula essas entidades a códigos exclusivos da versão 2021 da [Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão, Modificação Clínica \(CID-10-CM\)](#). InferRxNorm identifica medicamentos listados no texto clínico como entidades e vincula essas entidades a identificadores de conceitos normalizados do [RxNormbanco de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA](#). O InferSNOMEDCT detecta conceitos médicos, como condições médicas e anatomia, exames médicos ou tratamentos e procedimentos, como entidades e os vincula a códigos da ontologia [Nomenclatura Sistematizada da Medicina, Termos Clínicos \(SNOMED CT\)](#).

## Benefícios do Amazon Comprehend Medical

Alguns benefícios de usar o Amazon Comprehend Medical incluem:

- Integração fácil e poderosa do processamento de linguagem natural em seus aplicativos — Use APIs para criar recursos de análise de texto em seus aplicativos para um processamento de linguagem natural poderoso e preciso.
- Precisão: use a tecnologia de aprendizado profundo para analisar textos com precisão. Nossos modelos são constantemente treinados com novos dados em vários domínios para melhorar a precisão.
- Escalabilidade: detecte informações de vários documentos, possibilitando insights rápidos sobre a saúde e os cuidados com os pacientes.
- Integrar-se a outros serviços da AWS: o Amazon Comprehend Medical foi projetado para funcionar perfeitamente com outros serviços da AWS, como Amazon S3 e AWS Lambda. Armazene seus documentos no Amazon S3, analise dados em tempo real com o Firehose ou use o Amazon Transcribe para transcrever narrativas de pacientes em texto que pode ser analisado pelo Amazon Comprehend Medical. O Support for AWS Identity and Access Management (IAM) facilita o controle seguro do acesso às operações do Amazon Comprehend Medical. Usando o IAM, você pode criar e gerenciar usuários e grupos da AWS para conceder acesso apropriado aos desenvolvedores e usuários finais.
- Baixo custo: pague somente pelos documentos que você analisar. Não há tarifas mínimas nem compromissos antecipados.

## Conformidade com a HIPAA

Este é um serviço qualificado da HIPAA. [Para obter mais informações sobre AWS a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde dos EUA de 1996 \(HIPAA\) e o uso de AWS serviços para processar, armazenar e transmitir informações de saúde protegidas \(PHI\), consulte Visão geral da HIPAA.](#)

As conexões com o Amazon Comprehend Medical contendo PHI devem ser criptografadas. Por padrão, todas as conexões com o Amazon Comprehend Medical usam HTTPS sobre TLS. O Amazon Comprehend Medical não armazena persistentemente o conteúdo do cliente. Portanto, não é necessário configurar a criptografia em repouso no serviço.

## Acessar o Amazon Comprehend Medical

1. Console de Gerenciamento da AWS: fornece uma interface da Web que pode ser usada para acessar o Amazon Comprehend Medical.

2. **AWS Command Line Interface (AWS CLI):** fornece comandos para um amplo conjunto de serviços da AWS, inclusive Amazon Comprehend Medical, e é compatível com Windows, macOS e Linux. Para obter informações sobre como instalar a CLI da AWS, consulte [Instalar a interface da linha de comando da AWS](#).
3. **AWS SDKs** — A AWS fornece SDKs (kits de desenvolvimento de software) que consistem em bibliotecas e código de amostra para várias linguagens e plataformas de programação (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android etc.). Eles SDKs fornecem uma maneira conveniente de criar acesso programático ao Amazon Comprehend Medical e à AWS. Para obter mais informações, consulte [AWS SDKs](#).

## Como começar a usar o Amazon Comprehend Medical

Se você estiver usando o Amazon Comprehend Medical pela primeira vez, recomendamos que leia as seções a seguir nesta ordem:

1. [Como funciona o Amazon Comprehend Medical](#): esta seção apresenta os conceitos do Amazon Comprehend Medical.
2. [Conceitos básicos do Amazon Comprehend Medical](#): esta seção explica como configurar a conta e testar o Amazon Comprehend Medical.

# Como funciona o Amazon Comprehend Medical

O Amazon Comprehend Medical usa um modelo pré-treinado de processamento de linguagem natural (PLN) para analisar textos clínicos não estruturados por meio da detecção de entidades. Uma entidade é uma referência textual a informações médicas, como condições médicas, medicamentos ou Informações de Saúde Protegidas (PHI). Algumas operações vão um passo adiante ao detectar entidades e, em seguida, vinculá-las a ontologias padronizadas. O modelo é treinado continuamente em uma grande quantidade de textos médicos, então você não precisa fornecer dados de treinamento. Todos os resultados incluem uma pontuação de confiança, que indica a confiança que o Amazon Comprehend Medical tem na precisão das entidades detectadas.

Tanto a detecção de entidades quanto a vinculação de ontologias podem ser realizadas como operações síncronas ou assíncronas:

- Operações síncronas: permitem a análise em documentos únicos que retornam os resultados da análise diretamente para seus aplicativos. Use as operações de documento único ao criar um aplicativo interativo que funciona em um documento por vez.
- Operações assíncronas: permitem a análise de uma coleção ou lote de documentos armazenados em um bucket do Amazon S3. Os resultados da análise são retornados em um bucket do S3.

## Note

O Amazon Comprehend Medical pode analisar somente texto em inglês (US-EN).

## Detecção síncrona de entidades

As operações `DetectEntitiesV2` e `DetectPHI` detectam entidades em textos clínicos não estruturados de documentos individuais. Você envia um documento para o serviço Amazon Comprehend Medical e recebe os resultados da análise na resposta.

## Análise assíncrona de lotes

As operações `StartEntitiesDetectionV2Job` e `StartPHIDetectionJob` iniciam trabalhos assíncronos para detectar referências a informações médicas, como condição médica, tratamento, testes e resultados, ou informações de saúde protegidas armazenadas em um bucket do Amazon S3. A saída

do trabalho de detecção é gravada em um bucket separado do Amazon S3, a partir do qual pode ser usada para processamento adicional ou análise posterior.

O Start ICD10 CMInference Job e StartRxNormInferenceJobs operações iniciam uma ontologia que vincula operações em lote que detectam entidades e vinculam essas entidades a códigos padronizados nas bases de conhecimento RxNorm e do ICD-10-CM.

## Vinculação de ontologias

O Infer ICD10 CM, o InfersNomeDCT e InferRxNormas operações detectam possíveis condições médicas e medicamentos e os vinculam a códigos no ICD-10-CM, no SNOMED CT ou nas bases de conhecimento, respectivamente. RxNorm Você pode usar a análise em lote de vinculações de ontologia para analisar um conjunto de documentos ou um único documento grande. Usando o console ou a ontologia que vincula o lote APIs, você pode realizar operações para iniciar, interromper, listar e descrever trabalhos de análise em lote em andamento.

## Vinculação a conceitos na base de conhecimento de condições médicas do ICD-10-CM

A operação Infer ICD10 CM detecta possíveis condições médicas e as vincula aos códigos da versão 2019 da Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão, Modificação Clínica (CID-10-CM). Para cada possível condição médica detectada, o Amazon Comprehend Medical lista os códigos e descrições ICD-10-CM correspondentes. As condições médicas listadas nos resultados incluem uma pontuação de confiança, que indica a confiança que o Amazon Comprehend Medical tem na precisão das entidades em relação aos conceitos correspondentes nos resultados.

## Vinculação a conceitos na base de RxNorm conhecimento de medicamentos

A InferRxNormoperação identifica os medicamentos listados no prontuário do paciente como entidades. Ele vincula entidades a identificadores de conceito (RxCUI) do RxNorm banco de dados da National Library of Medicine. Cada RxCUI é exclusivo de diferentes dosagens e formas de dosagem. Os medicamentos listados nos resultados incluem uma pontuação de confiança, que indica a confiança que o Amazon Comprehend Medical tem na precisão das entidades que correspondem aos conceitos da base de conhecimento. RxNorm O Amazon Comprehend Medical lista os principais Rx CUIs que potencialmente coincidem com cada medicamento que ele detecta em ordem decrescente com base na pontuação de confiança.

## Vinculação a conceitos na base de conhecimento de condições médicas do SNOMED CT

A operação InferSNOMEDCT identifica possíveis conceitos médicos como entidades e os vincula a códigos da versão 2021-03 da Nomenclatura Sistematizada de Medicina, Termos Clínicos (SNOMED CT). O SNOMED CT fornece um vocabulário abrangente de conceitos médicos, incluindo condições médicas e anatomia, exames médicos, tratamentos e procedimentos. Para cada ID de conceito correspondente, o Amazon Comprehend Medical retorna os cinco principais conceitos médicos, cada um com uma pontuação de confiança e informações contextuais, como características e atributos. O conceito SNOMED CT IDs pode então ser usado para estruturar dados clínicos do paciente para codificação médica, relatórios ou análises clínicas quando usado com a polihierarquia do SNOMED CT.

# Conceitos básicos do Amazon Comprehend Medical

Para começar a usar o Amazon Comprehend Medical, configure uma conta da AWS e crie um usuário AWS Identity and Access Management (IAM). Para usar a CLI do Amazon Comprehend Medical, faça o download dela e configure-a.

## Tópicos

- [Inscreva-se para um Conta da AWS](#)
- [Etapa 1: configurar o AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#)
- [Etapa 2: Começando a usar o console do Amazon Comprehend Medical](#)
- [Etapa 3: Começando a usar as APIs do Amazon Comprehend Medical](#)

## Inscreva-se para um Conta da AWS

Para começar AWS, você precisa de um Conta da AWS. Para obter informações sobre como criar um Conta da AWS, consulte [Introdução a um Conta da AWS](#) no Guia de AWS Gerenciamento de contas referência.

## Etapa 1: configurar o AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Você não precisa AWS CLI executar as etapas dos exercícios de introdução. No entanto, alguns dos outros exercícios neste guia a requerem. Se preferir, você pode pular esta etapa e acessar [Etapa 2: Começando a usar o console do Amazon Comprehend Medical](#) e configurar a AWS CLI mais tarde.

Para configurar o AWS CLI

1. Faça download e configure a AWS CLI. Para obter instruções, consulte os seguintes tópicos no Manual do usuário do AWS Command Line Interface :
  - [Configurando o AWS Command Line Interface](#)
  - [Configurando a AWS Command Line Interface](#)
2. No arquivo de AWS CLI configuração, adicione um perfil nomeado para o administrador:

```
[profile adminuser]
aws_access_key_id = adminuser access key ID
```

```
aws_secret_access_key = adminuser secret access key  
region = aws-region
```

Você usa esse perfil ao executar os AWS CLI comandos. Para obter mais informações sobre perfis nomeados, consulte [Perfis nomeados](#) no Guia do usuário da AWS Command Line Interface . Para obter uma lista das regiões do AWS , consulte [Regiões e endpoints](#) na Referência geral da Amazon Web Services.

3. Verifique a configuração digitando o seguinte comando de ajuda no prompt de comando:

```
aws help
```

## Próxima etapa

### [Etapa 2: Começando a usar o console do Amazon Comprehend Medical](#)

## Etapa 2: Começando a usar o console do Amazon Comprehend Medical

A maneira mais fácil de começar a usar o console do Comprehend Medical é analisar um pequeno arquivo de texto. Se você ainda não revisou os conceitos e a terminologia em [Como funciona o Amazon Comprehend Medical](#), recomendamos fazer isso antes de continuar.

### Tópicos

- [Analisar o texto clínico usando o console](#)

## Analisar o texto clínico usando o console

O console Comprehend Medical permite que você analise o conteúdo do texto clínico, com até 20.000 caracteres. Os resultados são mostrados no console para que você possa revisar a análise.

Para começar a analisar documentos, faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console Comprehend Medical.

Em Comprehend Medical, escolha análise. Real-time

O console exibe um texto de amostra e a análise desse texto:

Amazon Comprehend Medical &gt; Real-time analysis

## Real-time analysis [Info](#)

See how Comprehend Medical recognizes entities related to the healthcare domain. To analyze your text, type or paste it in the text box.

### Input text

[Supported languages](#) 

Pt is 87 yo woman, highschool teacher with past medical history that includes  
 - status post cardiac catheterization in April 2019.  
 She presents today with palpitations and chest pressure.  
 HPI : Sleeping trouble on present dosage of Clonidine. Severe Rash on face and leg, slightly itchy  
 Meds : Vyvanse 50 mgs po at breakfast daily,  
 Clonidine 0.2 mgs -- 1 and 1 / 2 tabs po qhs  
 HEENT : Boggy inferior turbinates, No oropharyngeal lesion

415 of 20000 characters used.

Clear text

Analyze

Você pode substituir o texto de amostra pelo seu próprio texto em inglês e, em seguida, escolher Analisar para obter uma análise do seu texto.

### Insights [Info](#)


Entities

RxNorm concepts

ICD-10-CM concepts

SNOMED CT concepts

#### Analyzed text

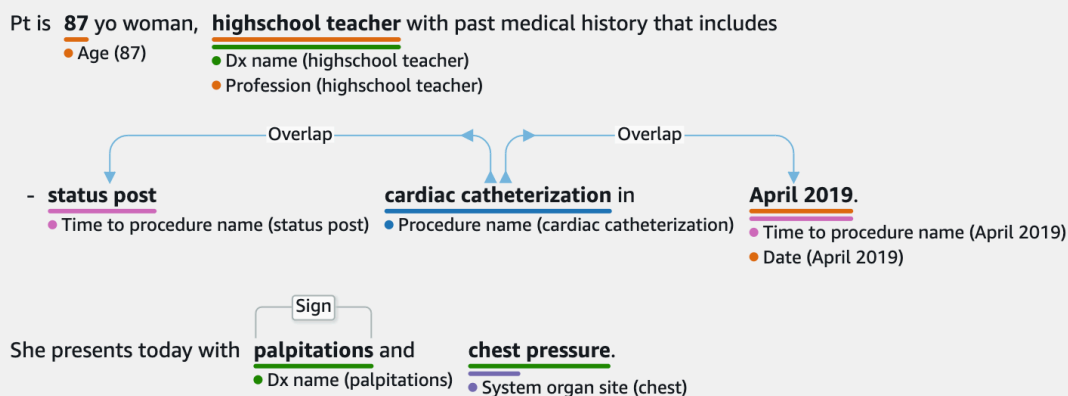

Abaixo do texto de entrada, o texto analisado é codificado por cores para indicar a categoria da entidade:

- As etiquetas laranja identificam os dados do PHI.
- Etiquetas vermelhas identificam medicamentos.
- Etiquetas verdes identificam a condição médica.
- As etiquetas azuis identificam teste, tratamento ou procedimento (TTP).
- Etiquetas roxas identificam a anatomia.
- Etiquetas cor-de-rosa identificam expressões temporais.

Para obter mais informações, consulte [Como funciona o Amazon Comprehend Medical](#).

No console, abaixo da caixa de entrada, o painel Texto analisado mostra mais informações sobre o texto.

A seção Entidade exibe cartões para as entidades encontradas no texto:

▼ Results (27)

Find entities  All  < 1 2 3 4 >

Entity	Type	Category	Traits
87 0.9997 score	● Age	Protected health information	-
highschool teacher 0.7305 score	● Dx name	Medical condition	-
highschool teacher 0.2063 score	● Profession	Protected health information	-
status post 0.9525 score	● Time to procedure name	Time expression	-
cardiac catheterization 0.8982 score	● Procedure name	Test treatment procedure	-

Cada cartão mostra o texto e seu tipo de entidade.

Ao lado de cada uma das entidades, uma pontuação representa a confiança que o Comprehend Medical tem na identificação do texto como o tipo de entidade mostrada.

Para ver a estrutura JSON da solicitação e dos resultados, escolha Integração de aplicativos. A estrutura JSON é a mesma estrutura retornada pela operação.

## Próxima etapa

### [Etapa 3: Começando a usar as APIs do Amazon Comprehend Medical](#)

## Etapa 3: Começando a usar as APIs do Amazon Comprehend Medical

Os exemplos a seguir demonstram como usar as operações do Amazon Comprehend Medical usando Java e AWS CLI Python. Use-as para saber mais sobre as operações do Amazon Comprehend Medical e como base para seus próprios aplicativos.

Para executar os exemplos AWS CLI e Python, instale o AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Etapa 1: configurar o AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#).

Para executar os exemplos de Java, instale o AWS SDK para Java. Para obter instruções para instalar o AWS SDK para Java, consulte [Configurar o AWS SDK para Java](#).

### Tópicos

- [Detectando entidades médicas usando o AWS Command Line Interface](#)
- [Detectando entidades médicas usando o AWS SDK para Java](#)
- [Detectando entidades médicas usando o AWS SDK para Python \(Boto\)](#)

## Detectando entidades médicas usando o AWS Command Line Interface

O exemplo a seguir demonstra o uso da DetectEntitiesV2 operação usando o AWS CLI para retornar as entidades médicas detectadas no texto. Para executar o exemplo, é necessário instalar a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte [the section called “Etapa 1: configurar o AWS CLI”](#).

O exemplo é formatado para Unix, Linux e macOS. Para Windows, substitua o caractere de continuação Unix de barra invertida (\) no final de cada linha por um circunflexo (^).

```
aws comprehendmedical detect-entities-v2 \  
  --endpoint endpoint \  
  --region region \  
  --text "aspirin is required 20 mg po daily for 2 times as tab"
```

A resposta é a seguinte:

```
{
```

```
"Entities": [
  {
    "Category": "MEDICATION",
    "BeginOffset": 0,
    "EndOffset": 7,
    "Text": "aspirin",
    "Traits": [],
    "Score": 0.9988090991973877,
    "Attributes": [
      {
        "BeginOffset": 20,
        "EndOffset": 25,
        "Text": "20 mg",
        "Traits": [],
        "Score": 0.9559056162834167,
        "Type": "DOSAGE",
        "Id": 1,
        "RelationshipScore": 0.9981593489646912
      },
      {
        "BeginOffset": 26,
        "EndOffset": 28,
        "Text": "po",
        "Traits": [],
        "Score": 0.9995359182357788,
        "Type": "ROUTE_OR_MODE",
        "Id": 2,
        "RelationshipScore": 0.9969323873519897
      },
      {
        "BeginOffset": 29,
        "EndOffset": 34,
        "Text": "daily",
        "Traits": [],
        "Score": 0.9803128838539124,
        "Type": "FREQUENCY",
        "Id": 3,
        "RelationshipScore": 0.9990783929824829
      },
      {
        "BeginOffset": 39,
        "EndOffset": 46,
        "Text": "2 times",
        "Traits": [],
```

```
        "Score": 0.8623972535133362,
        "Type": "DURATION",
        "Id": 4,
        "RelationshipScore": 0.9996501207351685
    },
    {
        "BeginOffset": 50,
        "EndOffset": 53,
        "Text": "tab",
        "Traits": [],
        "Score": 0.784785270690918,
        "Type": "FORM",
        "Id": 5,
        "RelationshipScore": 0.9986748695373535
    }
],
"Type": "GENERIC_NAME",
"Id": 0
}
],
"UnmappedAttributes": []
}
```

## Detectando entidades médicas usando o AWS SDK para Java

O exemplo a seguir usa a operação `DetectEntitiesV2` com Java. Para executar o exemplo, instale o AWS SDK para Java. Para obter instruções sobre como instalar o AWS SDK para Java, consulte [Configurar o AWS SDK para Java](#).

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehendmedical.AWSComprehendMedical;
import com.amazonaws.services.comprehendmedical.AWSComprehendMedicalClient;
import com.amazonaws.services.comprehendmedical.model.DetectEntitiesRequest;
import com.amazonaws.services.comprehendmedical.model.DetectEntitiesResult;

public class SampleAPICall {

    public static void main() {
```

```

        AWSCredentialsProvider credentials
            = new AWSStaticCredentialsProvider(new BasicAWSCredentials("YOUR AWS
ACCESS KEY", "YOUR AWS SECRET"));

        AWSComprehendMedical client = AWSComprehendMedicalClient.builder()

.withCredentials(credentials)

                                                    .withRegion("YOUR
REGION")

                                                    .build();

        DetectEntitiesV2Request request = new DetectEntitiesV2Request();
        request.setText("cerealx 84 mg daily");

        DetectEntitiesV2Result result = client.detectEntitiesV2(request);
        result.getEntities().forEach(System.out::println);
    }
}

```

A saída contém as três entidades encontradas no texto de entrada e sua localização no texto de entrada. Um nível de confiança de que a entidade foi identificada corretamente também é listado com cada entidade. A saída a seguir mostra as entidades Generic\_Name, Dosage e Frequency do exemplo precedente.

```

{Id: 0,BeginOffset: 0,EndOffset: 3,Score: 0.9940211,Text: Bob,Category:
PROTECTED_HEALTH_INFORMATION,Type: NAME,Traits: [],}
{Id: 2,BeginOffset: 23,EndOffset: 30,Score: 0.99914634,Text: aspirin,Category:
MEDICATION,Type: GENERIC_NAME,Traits: [],Attributes:
[{{Type: DOSAGE,Score: 0.9630807,RelationshipScore: 0.99969745,Id: 1,BeginOffset:
14,EndOffset: 19,Text: 50 mg,Traits: []}}]}

```

## Detectando entidades médicas usando o AWS SDK para Python (Boto)

O exemplo a seguir usa a operação DetectEntitiesV2 com Python. Para executar o exemplo, instale a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte [the section called “Etapa 1: configurar o AWS CLI”](#).

```

import boto3
client = boto3.client(service_name='comprehendmedical', region_name='YOUR REGION')

```

```
result = client.detect_entities(Text= 'cerealx 84 mg daily')
entities = result['Entities']
for entity in entities:
    print('Entity', entity)
```

A saída contém as três entidades encontradas no texto de entrada e sua localização no texto de entrada. Um nível de confiança de que a entidade foi identificada corretamente também é listado com cada entidade. A saída a seguir mostra as entidades Generic\_Name, Dosage e Frequency do exemplo precedente.

```
('Entity', {u'Category': u'MEDICATION', u'BeginOffset': 0, u'EndOffset': 7,
            u'Text': u'cerealx', u'Traits': [], u'Score': 0.8877691626548767,
            u'Attributes': [{u'BeginOffset': 8, u'EndOffset': 13,
                            u'Text': u'84 mg', u'Traits': [], u'Score': 0.9337134957313538, u'Type':
            u'DOSAGE', u'Id': 1, u'RelationshipScore': 0.9995118379592896},
                            {u'BeginOffset': 14, u'EndOffset': 19, u'Text': u'daily', u'Traits': [],
            u'Score': 0.990627646446228, u'Type': u'FREQUENCY',
                            u'Id': 2, u'RelationshipScore': 0.9987651109695435}], u'Type':
            u'BRAND_NAME', u'Id': 0})
```

# Amazon Comprehend Medical e endpoints da VPC da interface (AWS PrivateLink)

É possível estabelecer uma conexão privada entre a VPC e o Amazon Comprehend Medical criando um endpoint da VPC de interface. Os endpoints VPC da Interface são alimentados por [AWS PrivateLink](#) uma tecnologia que você pode usar para acessar de forma privada o Amazon Comprehend APIs Medical sem um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão. Direct Connect As instâncias em sua VPC não precisam de endereços IP públicos para se comunicar com o Amazon Comprehend Medical. APIs O tráfego de rede entre a VPC e o Amazon Comprehend Medical não deixa a rede da Amazon.

Cada endpoint de interface é representado por uma ou mais [Interfaces de Rede Elástica](#) nas sub-redes.

Para obter mais informações, consulte [Interface VPC endpoints \(AWS PrivateLink\)](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

## Considerações sobre endpoints da VPC do Amazon Comprehend Medical

Antes de configurar um endpoint da VPC de interface para o Amazon Comprehend Medical, revise [Propriedades e limitações do endpoint de interface](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

O Amazon Comprehend Medical oferece suporte a chamadas para todas as ações de API da VPC.

## Criar um endpoint da VPC de interface para o Amazon Comprehend Medical

Você pode criar um VPC endpoint para o serviço Amazon Comprehend Medical usando o console Amazon VPC ou o `()`. AWS Command Line Interface AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Criar um endpoint de interface](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Crie um endpoint da VPC para o Amazon Comprehend Medical usando o seguinte nome de serviço:

- `com.amazonaws. region. compreenda a medicina`

Se você habilitar o DNS privado para o endpoint, poderá fazer solicitações de API para o Amazon Comprehend Medical usando seu nome DNS padrão para a região. Por exemplo, `.comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com`

Para mais informações, consulte [Acessar um serviço por um endpoint de interface](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

## Criar um endpoint da VPC de interface para o Amazon Comprehend Medical

Você pode anexar uma política de endpoint ao endpoint da VPC que controla o acesso ao Amazon Comprehend Medical. Essa política especifica as seguintes informações:

- A entidade principal que pode realizar ações.
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos aos quais as ações podem ser aplicadas.

Para mais informações, consulte [Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Exemplo: política de endpoint da VPC para ações do Amazon Comprehend Medical

Veja a seguir um exemplo de política de endpoint para o Amazon Comprehend Medical. Quando anexada a um endpoint, essa política concede acesso à ação `DetectEntitiesV2` listada do Amazon Comprehend Medical para todas as entidades principais em todos os recursos.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "comprehendmedical:DetectEntitiesV2"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

# Operações de API de análise de texto

Use o Amazon Comprehend Medical para examinar documentos clínicos e obter vários insights sobre seu conteúdo usando modelos pré-treinados de processamento de linguagem natural (PLN). Você pode realizar a análise em arquivos únicos ou em lote ou em vários arquivos armazenados em um bucket do Amazon Simple Storage Service (S3).

Com o Amazon Comprehend Medical, você pode realizar o seguinte em seus documentos:

- [Detectar entidades \(versão 2\)](#): examine textos clínicos não estruturados para detectar referências textuais para informações médicas, como condição médica, tratamento, testes e resultados e medicamentos. Essa versão usa um modelo diferente da API Detect entities original, e há algumas alterações na saída.
- [Detectar PHI](#): examine textos clínicos não estruturados para detectar referências textuais a informações de saúde protegidas (PHI), como nomes e endereços.

O Amazon Comprehend Medical também inclui várias operações de API que você pode usar para realizar análises de texto em lote em documentos clínicos. Para saber mais sobre como usar essas operações da API, consulte [the section called “Lote de análise de texto APIs”](#).

## Tópicos

- [Detectar entidades \(versão 2\)](#)
- [Detectar PHI](#)
- [Lote de análise de texto APIs](#)

## Detectar entidades (versão 2)

Use o DetectEntitiesV2 para detectar entidades em arquivos únicos ou o StartEntitiesDetectionV2Job para análise em lote em vários arquivos. Você pode detectar entidades nas seguintes categorias:

- ANATOMY: Detecta referências às partes do corpo ou sistemas corporais e às localizações dessas partes ou sistemas.
- BEHAVIORAL\_ENVIRONMENTAL\_SOCIAL: detecta os comportamentos e condições do ambiente que afetam a saúde de uma pessoa. Isso inclui uso de tabaco, consumo de álcool, uso de drogas recreativas, alergias, sexo e raça/etnia.

- **MEDICAL\_CONDITION**: Detecta os sinais, sintomas e diagnósticos de condições médicas.
- **MEDICATION**: Detecta informações sobre medicamentos e dosagens para o paciente.
- **PROTECTED\_HEALTH\_INFORMATION**: detecta as informações pessoais do paciente.
- **TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE**: detecta os procedimentos usados para determinar uma condição médica.
- **TIME\_EXPRESSION**: detecta entidades relacionadas ao momento em que estão associadas a uma entidade detectada.

Todas as seis categorias são detectadas pela operação DetectEntitiesV2. Para análises específicas de detecção de PHI, use DetectPHI em arquivos únicos e Start Job PHIDetection para análise em lote.

O Amazon Comprehend Medical detecta informações nas seguintes classes:

- **Entidade**: uma referência textual ao nome de objetos relevantes, como pessoas, tratamentos, medicamentos e condições médicas. Por exemplo, `.ibuprofen`
- **Categoria**: o agrupamento generalizado ao qual uma entidade detectada pertence. Por exemplo, "Ibuprofeno" faz parte da categoria **MEDICATION**.
- **Tipo**: o tipo de entidade detectada em uma única categoria. Por exemplo, "Ibuprofeno" está no tipo **GENERIC\_NAME** da categoria **MEDICATION**.
- **Atributo**: informações relacionadas a uma entidade detectada, como a dosagem de um medicamento. Por exemplo, `200 mg` é um atributo da entidade "Ibuprofeno".
- **Característica**: algo que o Amazon Comprehend Medical entende sobre uma entidade, com base no contexto. Por exemplo, um medicamento tem a característica **NEGATION** quando o paciente não está fazendo uso dele.
- **Tipo de relacionamento**: o relacionamento entre uma entidade e um atributo.

O Amazon Comprehend Medical fornece a localização de uma entidade no texto de entrada. No console do Amazon Comprehend, ele mostra a localização graficamente. Quando você usa a API, ela mostra a localização por deslocamento numérico.

Cada entidade e atributo inclui uma pontuação que indica o nível de confiança que o Amazon Comprehend Medical tem na precisão da detecção. Cada atributo também tem uma pontuação de relacionamento. A pontuação indica o nível de confiança que o Amazon Comprehend Medical tem na

precisão da relação entre o atributo e sua entidade mãe. Identifique o limite de confiança certo para o seu caso de uso. Use limites de alta confiança em situações que exijam grande precisão. Filtre os dados que não atingem o limite.

## Categoria da anatomia

A categoria ANATOMY detecta referências às partes do corpo ou sistemas corporais e às localizações dessas partes ou sistemas.

### Tipos

- SYSTEM\_ORGAN\_SITE: sistemas corporais, localizações ou regiões anatômicas e locais corporais.

### Atributos

- DIRECTION: termos direcionais. Por exemplo, esquerda, direita, medial, lateral, superior, inferior, posterior, anterior, distal, proximal, contralateral, bilateral, ipsilateral, dorsal, ventral e assim por diante.

## Categoria de saúde comportamental, ambiental e social

A categoria BEHAVIORAL\_ENVIRONMENTAL\_SOCIAL detecta os comportamentos e condições do ambiente que afetam a saúde de uma pessoa.

### Tipo

- ALCOHOL\_CONSUMPTION: define o consumo de álcool do paciente em termos de status de uso, frequência, quantidade e duração.
- ALLERGIES: define as alergias do paciente e as respostas aos alérgenos.
- GENDER: uma identificação das características da identidade de gênero.
- RACE\_ETHNICITY: uma construção sociopolítica da identificação de um paciente com grupos raciais e étnicos específicos.
- REC\_DRUG\_USE: define o consumo de álcool do paciente em termos de status de uso, frequência, quantidade e duração.
- TOBACCO\_USE: define o consumo de álcool do paciente em termos de status de uso, frequência, quantidade e duração.

## Atributos

Os seguintes atributos detectados se aplicam somente aos tipos `ALCOHOL_CONSUMPTION`, `TOBACCO_USE` e `REC_DRUG_USE`:

- `AMOUNT`: a quantidade de álcool, tabaco ou drogas recreativas usadas.
- `DURATION`: há quanto tempo o álcool, o tabaco ou a droga recreativa foram usados.
- `FREQUENCY`: a frequência de álcool, tabaco ou drogas recreativas usados.

## Características

As seguintes características detectadas se aplicam somente aos tipos `ALCOHOL_CONSUMPTION`, `ALLERGIES`, `TOBACCO_USE` e `REC_DRUG_USE`:

- `NEGATION`: uma indicação de que um resultado ou ação é negativo ou não está sendo executado.
- `PAST_HISTORY`: uma indicação de que o uso de álcool, tabaco ou drogas recreativas é do passado do paciente (antes do encontro atual).

## Categoria da condição médica

A categoria `MEDICAL_CONDITION` detecta os sinais, sintomas e diagnósticos de condições médicas. A categoria tem um tipo de entidade, quatro atributos e quatro características. Uma ou mais características podem ser associadas a um tipo. Informações contextuais sobre atributos e sua relação com o diagnóstico são detectadas e mapeadas `DX_NAME` até o fim. `RELATIONSHIP_EXTRACTION`. Por exemplo, a partir do texto "dor crônica na perna esquerda", "crônica" é detectada como o atributo `ACUITY`, "esquerda" é detectada como o atributo `DIRECTION` e "perna" é detectada como o atributo `SYSTEM_ORGAN_SITE`. As relações de cada um desses atributos são mapeadas para a entidade de condição médica "dor", junto com uma pontuação de confiança.

## Tipos

- `DX_NAME`: todas as condições médicas listadas. O tipo `DX_NAME` inclui doença atual, motivo da consulta e histórico médico.

## Atributos

- **ACUITY**: determinação da instância da doença, como crônica, aguda, repentina, persistente ou gradual.
- **DIRECTION**: termos direcionais. Por exemplo, esquerda, direita, medial, lateral, superior, inferior, posterior, anterior, distal, proximal, contralateral, bilateral, ipsilateral, dorsal ou ventral.
- **SYSTEM\_ORGAN\_SITE**: localização anatômica.
- **QUALITY**: qualquer termo descritivo da condição médica, como estágio ou grau.

## Características

- **DIAGNOSIS**: uma condição médica determinada como causa ou resultado dos sintomas. Os sintomas podem ser encontrados por meio de achados físicos, relatórios laboratoriais ou radiológicos ou outros meios.
- **HYPOTHETICAL**: uma indicação de que uma condição médica é expressa como uma hipótese.
- **LOW\_CONFIDENCE**: uma indicação de que uma condição médica é expressa como sendo de alta incerteza. Isso não está diretamente relacionado aos escores de confiança fornecidos.
- **NEGATION**: uma indicação de que um resultado ou ação é negativo ou não está sendo executado.
- **PERTAINS\_TO\_FAMILY**: uma indicação de que uma condição médica é relevante para a família do paciente, não para o paciente.
- **SIGN**: uma condição médica relatada pelo médico.
- **SYMPTOM**: uma condição médica relatada pelo paciente.

## Categoria do medicamento

A categoria **MEDICATION** detecta informações sobre medicamentos e dosagens para o paciente. Um ou mais atributos podem ser aplicados a um tipo.

### Tipos

- **BRAND\_NAME**: o nome comercial protegido por direitos autorais do medicamento ou agente terapêutico.
- **GENERIC\_NAME**: o nome não comercial, o nome do ingrediente ou a mistura da fórmula do medicamento ou agente terapêutico.

## Atributos

- **DOSAGE**: a quantidade de medicamento solicitada.
- **DURATION**: por quanto tempo o medicamento deve ser administrado.
- **FORM**: a forma do medicamento.
- **FREQUENCY**: com que frequência administrar o medicamento.
- **RATE**: A taxa de administração do medicamento (principalmente para infusões de medicamentos ou IVs).
- **ROUTE\_OR\_MODE**: o método de administração do medicamento.
- **STRENGTH**: a potência do medicamento.

## Características

- **NEGATION**: qualquer indicação de que o paciente não está tomando um medicamento.
- **PAST\_HISTORY**: uma indicação de que um medicamento detectado é do passado do paciente (antes do encontro atual).

## Categoria de Informações de Saúde Protegidas

A categoria `PROTECTED_HEALTH_INFORMATION` detecta as informações pessoais do paciente. Para saber mais sobre isso, consulte [Detectar PHI](#).

## Tipos

- **ADDRESS**: todas as subdivisões geográficas de um endereço de qualquer instalação, instalações médicas nomeadas ou enfermarias dentro de uma instalação.
- **AGE**: todos os componentes da idade, períodos de idade ou qualquer idade mencionada. Isso inclui os de um paciente, familiares ou outros. O padrão é em anos, salvo indicação em contrário.
- **EMAIL**: qualquer endereço de e-mail.
- **ID**: CPF, número do prontuário médico, número de identificação da instalação, número do ensaio clínico, número do certificado ou licença, número do veículo ou dispositivo, o local ou o provedor do atendimento. Isso também inclui qualquer número biométrico do paciente, como altura, peso ou valor laboratorial.
- **NAME**: todos os nomes. Normalmente, nomes do paciente, família ou provedor.

- **PHONE\_OR\_FAX**: qualquer número de telefone, fax ou pager. Exclui números de telefone nomeados, como 1-800-QUIT-NOW e 911.
- **PROFESSION**: qualquer profissão ou empregador que diga respeito ao paciente ou à família do paciente. Isso não inclui a profissão de médico mencionada na nota.

## Categoria de teste, tratamento e procedimento

A categoria **TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE** detecta os procedimentos usados para determinar uma condição médica. Um ou mais atributos podem estar relacionados a uma entidade do tipo **TEST\_NAME**.

### Tipos

- **PROCEDURE\_NAME**: intervenções como uma ação única realizada no paciente para tratar uma condição médica ou fornecer assistência ao paciente.
- **TEST\_NAME**: procedimentos realizados em um paciente para diagnóstico, medição, triagem ou avaliação que podem ter um valor resultante. Isso inclui qualquer procedimento, processo, avaliação ou classificação para determinar um diagnóstico, descartar ou encontrar uma condição ou escalar ou pontuar um paciente.
- **TREATMENT\_NAME**: intervenções realizadas durante um período para combater uma doença ou um distúrbio. Isso inclui grupos de medicamentos, como antivirais e vacinas.

### Atributos

- **TEST\_VALUE**: o resultado de um teste. Aplica-se somente ao tipo de entidade **TEST\_NAME**.
- **TEST\_UNIT**: a unidade de medida que pode acompanhar o valor do teste. Aplica-se somente ao tipo de entidade **TEST\_NAME**.

### Características

- **FUTURE**: uma indicação de que um teste, tratamento ou procedimento se refere a uma ação ou evento que ocorrerá após o assunto das notas.
- **HYPOTHETICAL**: uma indicação de que um teste, tratamento ou procedimento é expresso como uma hipótese.
- **NEGATION**: uma indicação de que um resultado ou ação é negativo ou não está sendo executado.

- PAST\_HISTORY: uma indicação de que um teste, tratamento ou procedimento é do passado do paciente (antes do encontro atual).

## Categoria de expressão de tempo

A categoria TIME\_EXPRESSION detecta entidades relacionadas ao tempo. Isso inclui entidades como datas e expressões de horário, como "três dias atrás", "hoje", "atualmente", "dia da admissão", "último mês" ou "16 dias". Os resultados nessa categoria só são retornados se estiverem associados a uma entidade. Por exemplo, "Ontem, o paciente tomou 200 mg de ibuprofeno" retornaria Yesterday como uma TIME\_EXPRESSION entidade que se sobrepõe à entidade "ibuprofeno" GENERIC\_NAME. No entanto, não seria reconhecido como uma entidade na expressão "ontem, o paciente passeou com o cachorro".

### Tipos

- TIME\_TO\_MEDICATION\_NAME: a data em que o medicamento foi tomado. Os atributos específicos desse tipo são BRAND\_NAME e GENERIC\_NAME.
- TIME\_TO\_DX\_NAME: a data em que ocorreu uma condição médica. O atributo desse tipo é DX\_NAME.
- TIME\_TO\_TEST\_NAME: a data em que o teste foi realizado. O atributo desse tipo é TEST\_NAME.
- TIME\_TO\_PROCEDURE\_NAME: a data em que um procedimento foi realizado. O atributo desse tipo é PROCEDURE\_NAME.
- TIME\_TO\_TREATMENT\_NAME: a data em que um tratamento foi administrado. O atributo desse tipo é TREATMENT\_NAME.

### Tipo de relacionamento

- O relacionamento entre uma entidade e um atributo. O reconhecido Relationship\_type é o seguinte:

Overlap: TIME\_EXPRESSION concorda com a entidade detectada.

# Detectar PHI

Use a operação DetectPHI quando quiser detectar somente dados de Informações de Saúde Protegidas (PHI) ao digitalizar o texto clínico. Para detectar todas as entidades disponíveis no texto clínico, use DetectEntitiesV2.

Essa API é melhor para um caso de uso em que somente a detecção de entidades PHI é necessária. Para obter informações sobre informações nas categorias não PHI, consulte [Detectar entidades \(versão 2\)](#)

## Important

O Amazon Comprehend Medical fornece pontuações de confiança que indicam o nível de confiança na precisão das entidades detectadas. Avalie essas pontuações de confiança e identifique o limite de confiança certo para seu caso de uso. Para casos de uso específicos de conformidade, recomendamos que você use análise humana adicional ou outros métodos para confirmar a precisão das PHI detectadas.

De acordo com a lei HIPAA, as PHI baseadas em uma lista de 18 identificadores devem ser tratadas com cuidado especial. O Amazon Comprehend Medical detecta entidades associadas a esses identificadores, mas essas entidades não mapeiam 1:1 para a lista especificada pelo método Safe Harbor. Nem todos os identificadores estão contidos em textos clínicos não estruturados, mas o Amazon Comprehend Medical cobre todos os identificadores relevantes. Esses identificadores consistem em dados que podem ser usados para identificar um paciente individual, incluindo a lista a seguir. Para obter mais informações, consulte [Health Information Privacy](#) no U.S. Site do Governo de Saúde e Serviços Humanos.

Cada PHI-related entidade inclui uma pontuação (Score na resposta) que indica o nível de confiança que o Amazon Comprehend Medical tem na precisão da detecção. Identifique o limite de confiança certo para seu caso de uso e filtre entidades que não o atendam. Ao identificar ocorrências de PHI, talvez seja melhor usar um limite de confiança baixo para filtrar a fim de capturar mais entidades detectadas em potencial. Isso é especialmente verdadeiro quando não se usa os valores das entidades detectadas em casos de uso de conformidade.

As seguintes PHI-related entidades podem ser detectadas executando as operações DetectPHI ou DetectEntities V2:

## Entidades PHI detectadas

Entidade	Description	Categoria da HIPAA
AGE	Todos os componentes da idade, faixa etária e qualquer idade mencionada, seja paciente, membro da família ou outras pessoas envolvidas na nota. O padrão é em anos, salvo indicação em contrário.	3. Datas relacionadas a um indivíduo
DATE	Qualquer data relacionada ao paciente ou ao atendimento ao paciente.	3. Datas relacionadas a um indivíduo
NAME	Todos os nomes mencionados na nota clínica, geralmente e pertencentes ao paciente, à família ou ao profissional de saúde.	1. Nome
PHONE_OR_FAX	Qualquer telefone, fax, pager; exclui números de telefone nomeados, como 1-800- e QUIT-NOW 911.	4. Número de telefone 5. Número de FAX
EMAIL	Qualquer endereço de e-mail.	6. Endereços de e-mail
ID	Qualquer tipo de número associado à identidade de um paciente. Isso inclui o número de CPF, número do prontuário médico, número de identificação da instalação, número do ensaio clínico, número do certificado ou licença, número do veículo ou dispositivo. Também	7. Número da previdência social 8. Número do prontuário médico 9. Número do plano de saúde 10. Números de conta

Entidade	Description	Categoria da HIPAA
	inclui números biométricos e números que identificam o local do atendimento ou do prestador.	11. Certificate/License números 12. Identificadores de veículos 13. Números de dispositivos 16. Informações biométricas 18. Quaisquer outras características de identificação
URL	Qualquer URL da Web.	14. URLs
ADDRESS	Isso inclui todas as subdivisões geográficas de um endereço de qualquer instalação, instalações médicas nomeadas ou enfermarias dentro de uma instalação.	2. Localização geográfica
PROFISSÃO	Inclui qualquer profissão ou empregador mencionado em uma nota no que diz respeito ao paciente ou à família do paciente.	18. Quaisquer outras características de identificação

## Exemplo

O texto "O paciente é John Smith, professor de 48 anos e residente em Seattle, Washington". retornará:

- "John Smith" como uma entidade do tipo NAME na categoria PROTECTED\_HEALTH\_INFORMATION.
- "48" como uma entidade do tipo AGE na categoria PROTECTED\_HEALTH\_INFORMATION.

- "professor" como uma entidade do tipo PROFESSION (característica identificadora) na categoria PROTECTED\_HEALTH\_INFORMATION.
- "Seattle, Washington" como ADDRESS entidade na categoria PROTECTED\_HEALTH\_INFORMATION.

No console do Amazon Comprehend Medical, isso é mostrado assim:

Patient is **John Smith**, a **48** year old **teacher** and resident  
● Name (John Smith) ● Age (48) ● Profession (teacher)

of **Seattle, Washington**.  
● Address (Seattle, Washington)

Ao usar a operação DetectPHI, a resposta aparece assim. Quando você usa a StartPHIDetectionJob operação, o Amazon Comprehend Medical cria um arquivo no local de saída com essa estrutura.

```
{
  "Entities": [
    {
      "Id": 0,
      "BeginOffset": 11,
      "EndOffset": 21,
      "Score": 0.997368335723877,
      "Text": "John Smith",
      "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
      "Type": "NAME",
      "Traits": []
    },
    {
      "Id": 1,
      "BeginOffset": 25,
      "EndOffset": 27,
      "Score": 0.9998362064361572,
      "Text": "48",
      "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
      "Type": "AGE",
      "Traits": []
    },
    {
      "Id": 2,
      "BeginOffset": 37,
```

```
    "EndOffset": 44,
    "Score": 0.8661606311798096,
    "Text": "teacher",
    "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
    "Type": "PROFESSION",
    "Traits": []
  },
  {
    "Id": 3,
    "BeginOffset": 61,
    "EndOffset": 68,
    "Score": 0.9629441499710083,
    "Text": "Seattle",
    "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
    "Type": "ADDRESS",
    "Traits": []
  },
  {
    "Id": 4,
    "BeginOffset": 78,
    "EndOffset": 88,
    "Score": 0.38217034935951233,
    "Text": "Washington",
    "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
    "Type": "ADDRESS",
    "Traits": []
  }
],
"UnmappedAttributes": []
}
```

## Lote de análise de texto APIs

Use o Amazon Comprehend Medical para analisar textos médicos armazenados no bucket do Amazon S3. Analise até 10 GB de documentos em um lote. Você usa o console para criar e gerenciar trabalhos de análise em lote ou usa em lote APIs para detectar entidades médicas, incluindo informações de saúde protegidas (PHI). O APIs início, a interrupção, a lista e a descrição dos trabalhos de análise em lote em andamento.

Informações sobre preços para análise de lotes e outras operações do Amazon Comprehend Medical podem ser encontradas [aqui](#).

## Aviso importante

As operações de análise do Amazon Comprehend Medical não substituem o aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico profissional. Identifique o limite de confiança certo para seu caso de uso e use limites de alta confiança em situações que exigem alta precisão. Para certos casos de uso, os resultados devem ser revisados e verificados por revisores humanos devidamente treinados. Todas as operações do Amazon Comprehend Medical só devem ser usadas em cenários de atendimento ao paciente após uma revisão que assegure a precisão e uma opinião médica confiável por profissionais médicos treinados.

## Executando a análise em lote usando o APIs

Você pode executar um trabalho de análise em lote usando o console do Amazon Comprehend Medical ou o Amazon Comprehend Medical Batch. APIs

### Pré-requisitos

Ao usar a API do Amazon Comprehend Medical, crie uma política do AWS Identity Access and Management (IAM) e anexe-a a um perfil do IAM. Para saber mais sobre as políticas de confiança e os perfis do IAM, consulte [Políticas e permissões do IAM](#).

1. Faça upload de seus dados em um bucket do S3.
2. Para iniciar um novo trabalho de análise, use a operação `StartEntitiesDetection V2Job` ou a operação `Start PHIDetection Job`. Ao iniciar o trabalho, informe ao Amazon Comprehend Medical o nome do bucket do S3 de entrada que contém os arquivos de entrada e designe o bucket do S3 de saída para gravar os arquivos após a análise em lote.
3. Monitore o progresso do trabalho usando o console ou a operação `DescribeEntitiesDetection V2Job` ou a operação `Describe PHIDetection Job`. Além disso, o `ListEntitiesDetection V2Jobs` e o `List PHIDetection Jobs` permitem que você veja o status de todas as ontologias que vinculam trabalhos de análise em lote.
4. Se você precisar interromper um trabalho em andamento, use o `StopEntitiesDetection V2Job` ou o `Stop Job PHIDetection` para interromper a análise.
5. Para ver os resultados do seu trabalho de análise, consulte o bucket do S3 de saída que você configurou ao iniciar o trabalho.

## Executar análise em lote usando o console

1. Faça upload de seus dados em um bucket do S3.
2. Para iniciar um novo trabalho de análise, selecione o tipo de análise que você executará. Em seguida, forneça o nome do bucket do S3 que contém os arquivos de entrada e o nome do bucket do S3 para o qual você deseja enviar os arquivos de saída.
3. Monitore o status do seu trabalho enquanto ele estiver em andamento. No console, você pode visualizar todas as operações de análise em lote e seu status, incluindo quando a análise foi iniciada e finalizada.
4. Para ver os resultados do seu trabalho de análise, consulte o bucket do S3 de saída que você configurou ao iniciar o trabalho.

## Políticas do IAM para operações em lote

A função do IAM que chama o lote do Amazon Comprehend Medical APIs deve ter uma política que conceda acesso aos buckets do S3 que contêm os arquivos de entrada e saída. Também deve ser atribuída uma relação de confiança que permite que o serviço do Amazon Comprehend Medical assuma a função. Para saber mais sobre as políticas de confiança e os perfis do IAM, consulte [Perfis do IAM](#).

O perfil deve ter a política a seguir.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::input-bucket/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
```

```

    "Action": [
      "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::input-bucket",
      "arn:aws:s3:::output-bucket"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::output-bucket/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]
}

```

O perfil deve ter a relação de confiança a seguir. É recomendável usar as chaves de condição `aws:SourceAccount` ou `aws:SourceArn` para evitar o problema de segurança "confused deputy". Para saber mais sobre o problema do delegado confuso e como proteger sua AWS conta, consulte [O problema do deputado confuso](#) na documentação do IAM.

## JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "comprehendmedical.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {

```

```
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "account_id"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:comprehendmedical:us-
east-1:account_id:*"
    }
  }
}
]
```

## Arquivos de saída de análise em lote

O Amazon Comprehend Medical cria um arquivo de saída para cada arquivo de entrada no lote. O arquivo tem a extensão `.out`. O Amazon Comprehend Medical primeiro cria um diretório no bucket S3 de saída usando o `AwsAccountId - JobType - JobId` como nome e, em seguida, grava todos os arquivos de saída do lote nesse diretório. O Amazon Comprehend Medical cria esse novo diretório para que a saída de um trabalho não substitua a saída de outro.

A saída de uma operação em lote produz a mesma saída de uma operação síncrona. Para obter exemplos da saída gerada pelo Amazon Comprehend Medical, consulte [Detectar entidades \(versão 2\)](#).

Cada operação em lote produz três arquivos de manifesto que contêm informações sobre o trabalho.

- `Manifest`: resume o trabalho. Fornece informações sobre os parâmetros usados para a tarefa, o tamanho total da tarefa e o número de arquivos processados.
- `success`: fornece informações sobre os arquivos que foram processados com êxito. Inclui o nome do arquivo de entrada e saída e o tamanho do arquivo de entrada.
- `unprocessed`: lista os arquivos que o trabalho em lote não processou, incluindo códigos de erro e mensagens de erro por arquivo.

O Amazon Comprehend Medical grava os arquivos no diretório de saída que você especificou para o trabalho em lotes. O arquivo de resumo do manifesto será gravado na pasta de saída, junto com uma pasta chamada `Manifest_AccountId-Operation-JobId`. Dentro da pasta do manifesto, há uma pasta `success` que contém o manifesto de sucesso. Também está incluída uma pasta `failed`

que contém o manifesto do arquivo não processado. As seções a seguir mostram a estrutura dos arquivos do manifesto.

## Arquivo de manifesto em lote

Veja a seguir a estrutura JSON do arquivo do manifesto em lote.

```
{
  "Summary" :
  {
    "Status" : "COMPLETED | FAILED | PARTIAL_SUCCESS | STOPPED",
    "JobType" : "EntitiesDetection | PHIDetection",
    "InputDataConfiguration" : {
      "Bucket" : "input bucket",
      "Path" : "path to files/account ID-job type-job ID"
    },
    "OutputDataConfiguration" : {
      "Bucket" : "output bucket",
      "Path" : "path to files"
    },
    "InputFileCount" : number of files in input bucket,
    "TotalMeteredCharacters" : total characters processed from all files,
    "UnprocessedFilesCount" : number of files not processed,
    "SuccessFilesCount" : total number of files processed,
    "TotalDurationSeconds" : time required for processing,
    "SuccessfulFilesListLocation" : "path to file",
    "UnprocessedFilesListLocation" : "path to file",
    "FailedJobErrorMessage": "error message or if not applicable,
      The status of the job is completed"
  }
}
```

## Arquivo de manifesto de sucesso

Veja a seguir a estrutura JSON do arquivo que contém informações sobre arquivos processados com êxito.

```
{
  "Files": [{
    "Input": "input path/input file name",
    "Output": "output path/output file name",
    "InputSize": size in bytes of input file
  }, {
    "Input": "input path/input file name",
    "Output": "output path/output file name",
```

```
        "InputSize": size in bytes of input file
    }
}
```

## Arquivo de manifesto não processado

Veja a seguir a estrutura JSON do arquivo de manifesto que contém informações sobre arquivos não processados.

```
{
  "Files" : [ {
    "Input": "file_name_that_failed",
    "ErrorCode": "error code for exception",
    "ErrorMessage": "explanation of the error code and suggestions"
  },
  { ...}
]
}
```

# Vinculação de ontologias

Use o Amazon Comprehend Medical para detectar entidades em textos clínicos e vincular essas entidades a conceitos em ontologias médicas padronizadas, incluindo as bases de conhecimento ICD-10-CM e SNOMED CT. RxNorm Você pode realizar a análise em arquivos únicos ou em lote em documentos grandes ou em vários arquivos armazenados em um Amazon Simple Storage Service (S3).

## Vinculação do ICD-10-CM

Use o Infer ICD10 CM para detectar possíveis condições médicas como entidades e vinculá-las aos códigos da versão 2026 da [Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão, Modificação Clínica \(CID-10-CM\)](#). O ICD-10-CM é fornecido pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

Quando condições médicas são detectadas, InferICD10CM retorna os códigos e descrições ICD-10-CM correspondentes. As condições detectadas são listadas em ordem decrescente de confiança. As pontuações indicam a confiança na precisão das entidades correspondentes aos conceitos encontrados no texto. Informações relacionadas, como histórico familiar, sinais, sintomas e negação, são reconhecidas como características. Informações adicionais, como designações anatômicas e acuidade, são listadas como atributos.

O Infer ICD10 CM é adequado para os seguintes cenários:

- Auxiliar na codificação médica profissional dos prontuários dos pacientes
- Estudos e ensaios clínicos
- Integração com um sistema de software médico
- Detecção e diagnóstico precoces
- Gestão da saúde da população

## Categoria do ICD-10-CM

O Infer ICD10 CM detecta entidades na MEDICAL\_CONDITION categoria. Informações adicionais relacionadas também são detectadas e vinculadas como atributos ou características.

## Tipos do ICD-10-CM

O Infer ICD10 CM detecta entidades dos tipos e. DX\_NAME TIME\_EXPRESSION

## Características do ICD-10-CM

O Infer ICD10 CM detecta as seguintes informações contextuais como características:

- **DIAGNOSIS**: identificação de uma condição médica que é determinada pela avaliação dos sintomas.
- **HYPOTHETICAL**: uma indicação de que uma condição médica é expressa como uma hipótese.
- **LOW\_CONFIDENCE**: uma indicação de que uma condição médica é expressa como sendo de alta incerteza. Isso não está diretamente relacionado aos escores de confiança fornecidos.
- **NEGATION**: uma indicação de que uma condição médica não está presente.
- **PERTAINS\_TO\_FAMILY**: uma indicação de que uma condição médica é relevante para a família do paciente, não para o paciente.
- **SIGN**: uma condição médica relatada pelo médico.
- **SYMPTOM**: uma condição médica relatada pelo paciente.

## Atributos do ICD-10-CM

O Infer ICD10 CM detecta as seguintes informações contextuais como atributos:

- **DIRECTION**: termos direcionais. Por exemplo, esquerda, direita, medial, lateral, superior, inferior, posterior, anterior, distal, proximal, contralateral, bilateral, ipsilateral, dorsal ou ventral.
- **SYSTEM\_ORGAN\_SITE**: localização anatômica.
- **ACUITY**: determinação da instância de uma doença, como crônica, aguda, repentina, persistente ou gradual. Aplica-se somente ao tipo **MEDICAL\_CONDITION**.
- **QUALITY**: qualquer termo descritivo da condição médica, como estágio ou grau.

## Categoria de expressão de tempo

A categoria **TIME\_EXPRESSION** detecta entidades relacionadas ao tempo. Isso inclui entidades como datas e expressões de horário, como "três dias atrás", "hoje", "atualmente", "dia da admissão", "último mês" ou "16 dias". Os resultados nessa categoria só são retornados se estiverem associados a uma entidade. Por exemplo, a expressão "Ontem, o paciente foi diagnosticado com influenza"

retornaria Yesterday como uma entidade TIME\_EXPRESSION que se sobrepõe à entidade DX\_NAME "influenza". No entanto, "ontem" não seria reconhecido como uma entidade na expressão "ontem, o paciente passeou com o cachorro".

## Tipos

O tipo reconhecido de TIME\_EXPRESSION é TIME\_TO\_DX\_NAME: a data em que ocorreu uma condição médica. O atributo desse tipo é DX\_NAME.

## Tipo de relacionamento

O RELATIONSHIP\_TYPE se refere ao relacionamento entre uma entidade e um atributo. O RELATIONSHIP\_TYPE reconhecido é OVERLAP: TIME\_EXPRESSION concorda com a entidade detectada.

## Exemplos de entrada e resposta

### Note

Para obter a sintaxe específica de entrada e resposta da API, consulte [Infer ICD10 CM na Referência](#) de API do Amazon Comprehend Medical.

O exemplo de texto de entrada a seguir mostra como a operação InferICD10CM funciona. Para ver todo o texto de entrada, role sobre o botão Copiar.

```
"The patient is a 71-year-old female patient of Dr. X. The patient presented to the emergency room last evening with approximately 7 to 8 day history of abdominal pain which has been persistent. She has had no nausea and vomiting, but has had persistent associated anorexia. She is passing flatus, but had some obstipation symptoms with the last bowel movement two days ago. She denies any bright red blood per rectum and no history of recent melena. Her last colonoscopy was approximately 5 years ago with Dr. Y. She has had no definite fevers or chills and no history of jaundice. The patient denies any significant recent weight loss."
```

A operação InferICD10CM retorna a entrada a seguir no formato JSON (abreviado por brevidade).

```
{
  "Entities": [
    {
      "Id": 1,
```

```
"Text": "abdominal pain",
"Category": "MEDICAL_CONDITION",
"Type": "DX_NAME",
"Score": Float,
"BeginOffset": 153,
"EndOffset": 167,
"Attributes": [
  {
    "Type": "ACUITY",
    "Score": Float,
    "RelationshipScore": Float,
    "Id": 2,
    "BeginOffset": 183,
    "EndOffset": 193,
    "Text": "persistent",
    "Traits": []
  }
],
"Traits": [
  {
    "Name": "SYMPTOM",
    "Score": Float
  }
],
"ICD10CMConcepts": [
  {
    "Description": "Unspecified abdominal pain",
    "Code": "R10.9",
    "Score": Float
  },
  {
    "Description": "Epigastric pain",
    "Code": "R10.13",
    "Score": Float
  },
  {
    "Description": "Lower abdominal pain, unspecified",
    "Code": "R10.30",
    "Score": Float
  },
  {
    "Description": "Generalized abdominal pain",
    "Code": "R10.84",
    "Score": Float
  }
]
```

```

        },
        {
            "Description": "Upper abdominal pain, unspecified",
            "Code": "R10.10",
            "Score": Float
        }
    ]
}
...
"ModelVersion": "3.3.0.20251001"
}

```

O InferICD10CM também reconhece quando uma entidade é negada no texto. Por exemplo, se um paciente não está apresentando um sintoma, tanto o sintoma quanto a negação são identificados como características e listados com uma pontuação de confiança. Com base na entrada do exemplo anterior, o sintoma Nausea será listado em NEGATION porque o paciente não está sentindo náuseas.

```

{
    "Id": 3,
    "Text": "nausea",
    "Category": "MEDICAL_CONDITION",
    "Type": "DX_NAME",
    "Score": Float,
    "BeginOffset": 210,
    "EndOffset": 216,
    "Attributes": [],
    "Traits": [
        {
            "Name": "SYMPTOM",
            "Score": Float
        },
        {
            "Name": "NEGATION",
            "Score": Float
        }
    ],
    "ICD10CMConcepts": [
        {
            "Description": "Nausea with vomiting, unspecified",
            "Code": "R11.2",
            "Score": Float
        },
    ],
}

```

```
{
  {
    "Description": "Nausea",
    "Code": "R11.0",
    "Score": Float
  }
}
```

## RxNorm vinculando

Use a InferRxNorm operação para identificar medicamentos listados no prontuário do paciente como entidades. A operação também vincula essas entidades aos identificadores de conceito (RxCUI) do [RxNorm banco de dados da National Library of Medicine](#). A fonte de cada RxCUI é a versão RxNorm 2022-11-07 e a versão. RxTerms Cada RxCUI é exclusivo de diferentes dosagens e formas de dosagem. O Amazon Comprehend Medical lista os principais Rx potencialmente correspondentes CUIs para cada medicamento que ele detecta em ordem decrescente por pontuação de confiança. Use os códigos RxCUI para análises posteriores que não são possíveis com texto não estruturado. Informações relacionadas, como força, frequência, dose, forma de dose e via de administração, são listadas como atributos no formato JSON.

É possível usar o InferRxNorm nos seguintes cenários:

- Triagem de medicamentos que o paciente tomou.
- Prevenir reações potencialmente negativas entre medicamentos recém-prescritos e medicamentos que o paciente está tomando atualmente.
- Triagem para inclusão em ensaios clínicos com base no histórico de medicamentos usando o RxCUI.
- Verificar se a dosagem e a frequência de um medicamento são apropriadas.
- Triagem de usos, indicações e efeitos colaterais dos medicamentos.
- Gestão da saúde da população.

## Aviso importante

A InferRxNorm operação do Amazon Comprehend Medical não substitui aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico profissional. Identifique o limite de confiança certo para seu caso de uso e use limites de alta confiança em situações que exigem alta precisão. Use operações do

Amazon Comprehend Medical somente em cenários de atendimento ao paciente depois de revisar a precisão e receber o parecer de profissionais médicos treinados.

## RxNorm categoria

InferRxNorm detecta entidades na MEDICATION categoria. Ele também detecta informações adicionais relacionadas vinculadas como atributos ou características.

## RxNorm tipos

Os tipos de entidades na categoria Medication são

- **BRAND\_NAME**: o nome comercial protegido por direitos autorais do medicamento ou agente terapêutico.
- **GENERIC\_NAME**: o nome não comercial, o nome do ingrediente ou a mistura da fórmula do medicamento ou agente terapêutico.

## RxNorm atributos

- **DOSAGE**: a quantidade de medicamento solicitada.
- **DURATION**: por quanto tempo o medicamento deve ser administrado.
- **FORM**: a forma do medicamento.
- **FREQUENCY**: com que frequência administrar o medicamento.
- **RATE**: A taxa de administração do medicamento (principalmente para infusões de medicamentos ou IVs).
- **ROUTE\_OR\_MODE**: o método de administração de um medicamento.
- **STRENGTH**: a potência do medicamento.

## RxNorm traços

- **NEGATION**: qualquer indicação de que o paciente não está tomando um medicamento.
- **PAST\_HISTORY**: uma indicação de que um medicamento detectado é do passado do paciente (antes do encontro atual).

## Exemplos de entrada e resposta

### Note

Para obter a sintaxe específica de entrada e resposta da API, consulte a [InferRxNorm](#) Referência de API do Amazon Comprehend Medical.

O exemplo de texto de entrada a seguir mostra como a operação `InferRxNorm` funciona. Para ver todo o texto de entrada, role sobre o botão Copiar.

```
"fluoride topical ( fluoride 1.1 % topical gel ) 1 application Topically daily Brush onto teeth before bed time , spit , do not rinse, eat or drink for 20-30 minutes"
```

A operação `InferRxNorm` retorna a entrada a seguir no formato JSON:

```
{
  "Entities": [
    {
      "Id": 1,
      "Text": "fluoride",
      "Category": "MEDICATION",
      "Type": "GENERIC_NAME",
      "Score": Float,
      "BeginOffset": 19,
      "EndOffset": 27,
      "Attributes": [],
      "Traits": [],
      "RxNormConcepts": [
        {
          "Description": "fluorine",
          "Code": "1310123",
          "Score": Float
        },
        {
          "Description": "sodium fluoride",
          "Code": "9873",
          "Score": Float
        },
        {
          "Description": "magnesium fluoride",
```

```

        "Code": "1435860",
        "Score": Float
    },
    {
        "Description": "sulfuryl fluoride",
        "Code": "2289224",
        "Score": Float
    },
    {
        "Description": "acidulated phosphate fluoride",
        "Code": "236",
        "Score": Float
    }
]
}
],
"ModelVersion": "3.3.0.20221107"
}

```

Usando o texto de entrada a seguir, a operação `InferRxNorm` também reconhece a característica de negação.

```
'patient is not on warfarin'
```

A operação `InferRxNorm` retorna a entrada a seguir no formato JSON:

```

{
  "Entities": [
    {
      "Id": 1,
      "Text": "warfarin",
      "Category": "MEDICATION",
      "Type": "GENERIC_NAME",
      "Score": Float,
      "BeginOffset": 18,
      "EndOffset": 26,
      "Attributes": [],
      "Traits": [
        {
          "Name": "NEGATION",
          "Score": Float
        }
      ]
    }
  ],

```

```

    "RxNormConcepts": [
      {
        "Description": "warfarin",
        "Code": "11289",
        "Score": Float
      },
      {
        "Description": "warfarin sodium 2 MG Oral Tablet",
        "Code": "855302",
        "Score": Float
      },
      {
        "Description": "warfarin sodium 10 MG Oral Tablet",
        "Code": "855296",
        "Score": Float
      },
      {
        "Description": "warfarin sodium 2 MG Oral Tablet [Coumadin]",
        "Code": "855304",
        "Score": Float
      },
      {
        "Description": "warfarin sodium 10 MG Oral Tablet [Jantoven]",
        "Code": "855300",
        "Score": Float
      }
    ]
  },
  "ModelVersion": "3.3.0.20221107"
}

```

## Vinculação do SNOMED CT

Use o InferSNOMEDCT para detectar entidades médicas e vinculá-las a conceitos da versão 2022-03 da Nomenclatura Sistematizada de Medicina, Termos Clínicos (SNOMED CT). O SNOMED CT fornece um vocabulário abrangente de conceitos médicos, incluindo condições médicas e anatomia, exames médicos, tratamentos e procedimentos. Para saber mais sobre o SNOMED CT, acesse [SNOMED CT](#).

Para cada entidade médica detectada, o Amazon Comprehend Medical lista os cinco principais conceitos IDs e descrições de tomografia computadorizada do SNOMED associados ao conceito

médico, junto com uma pontuação de confiança para indicar a confiança do modelo em sua previsão. O conceito SNOMED CT IDs está listado em ordem decrescente de confiança junto com as pontuações de confiança. O conceito SNOMED CT IDs pode então ser usado para estruturar dados clínicos do paciente para codificação médica, relatórios ou análises clínicas quando você os usa com a polihierarquia do SNOMED CT.

O InferSNOMEDCT está disponível para clientes nos EUA. Para obter informações sobre o SNOMED CT em outros países e informações sobre o licenciamento do SNOMED CT, consulte [SNOMED CT](#).

O InferSNOMEDCT é ideal para os seguintes cenários:

- Assistência para codificação médica profissional em prontuários de pacientes
- Estudos e ensaios clínicos
- Gestão da saúde da população

O InferSNOMEDCT detecta entidades nas seguintes categorias. Informações adicionais contextuais também são detectadas e vinculadas como atributos ou características.

- MEDICAL\_CONDITION: os sinais, sintomas e diagnósticos de condições médicas.
- ANATOMY: as partes do corpo ou sistemas corporais e às localizações dessas partes ou sistemas.
- TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE: os procedimentos usados para determinar uma condição médica.

## Categoria da anatomia

A categoria ANATOMY detecta referências às partes do corpo ou sistemas corporais e às localizações dessas partes ou sistemas.

### Atributos

Os seguintes atributos são detectados para a categoria ANATOMY:

- DIRECTION: termos direcionais. Por exemplo, esquerda, direita, medial, lateral, superior, inferior, posterior, anterior, distal, proximal, contralateral, bilateral, ipsilateral, dorsal ou ventral.
- SYSTEM\_ORGAN\_SITE: sistemas corporais, localizações ou regiões anatômicas e locais corporais.

## Categoria da condição médica

A categoria `MEDICAL_CONDITION` detecta os sinais, sintomas e diagnósticos de condições médicas.

### Tipo

Para a categoria `MEDICAL_CONDITION`, o seguinte tipo é detectado:

- `DX_NAME`: identificação de uma condição médica que é determinada pela avaliação dos sintomas.

### Atributos

Os seguintes atributos são detectados para a categoria `MEDICAL_CONDITION`:

- `ACUITY`: determinação da instância da doença, como crônica, aguda, repentina, persistente ou gradual.
- `QUALITY`: qualquer termo descritivo da condição médica, como estágio ou grau.
- `DIRECTION`: termos direcionais. Por exemplo, esquerda, direita, medial, lateral, superior, inferior, posterior, anterior, distal, proximal, contralateral, bilateral, ipsilateral, dorsal ou ventral.
- `SYSTEM_ORGAN_SITE`: sistemas corporais, localizações ou regiões anatômicas e locais corporais.

### Características

As seguintes características são detectadas para a categoria `MEDICAL_CONDITION`:

- `DIAGNOSIS`: uma condição médica determinada como causa ou resultado dos sintomas. Os sintomas podem ser encontrados por meio de achados físicos, relatórios laboratoriais ou radiológicos ou outros meios.
- `HYPOTHETICAL`: uma indicação de que uma condição médica é expressa como uma hipótese.
- `LOW_CONFIDENCE`: uma indicação de que uma condição médica é expressa como sendo de alta incerteza. Isso não está diretamente relacionado aos escores de confiança fornecidos.
- `NEGATION`: uma indicação de que uma condição médica não está presente.
- `PERTAINS_TO_FAMILY`: uma indicação de que uma condição médica é relevante para a família do paciente, não para o paciente.
- `SIGN`: uma condição médica relatada pelo médico.
- `SYMPTON`: uma condição médica relatada pelo paciente.

## Categoria de teste, tratamento e procedimento

A categoria TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE detecta os procedimentos usados para determinar uma condição médica.

### Tipo

Para a categoria TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE, os seguintes tipos são detectados:

- **PROCEDURE\_NAME**: intervenções como uma ação única realizada no paciente para tratar uma condição médica ou fornecer assistência ao paciente.
- **TEST\_NAME**: procedimentos realizados em um paciente para diagnóstico, medição, triagem ou avaliação que podem ter um valor resultante. Isso inclui qualquer procedimento, processo, avaliação ou classificação para determinar um diagnóstico, descartar ou encontrar uma condição ou escalar ou pontuar um paciente.
- **TREATMENT\_NAME**: intervenções realizadas para combater uma doença ou um distúrbio. Isso inclui medicamentos, como antivirais e vacinas.

### Atributos

Para a categoria TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE, os seguintes tipos são detectados:

- **TEST\_NAME**: O teste de diagnóstico realizado.
- **TEST\_VALUE**: Os resultados numéricos de um teste de diagnóstico.
- **TEST\_UNIT**: As unidades associadas a um resultado TEST\_VALUE :.
- **PROCEDURE\_NAME**: O nome de uma cirurgia ou procedimento médico realizado.
- **TREATMENT\_NAME**: O nome de um tratamento administrado a um paciente.

### Características

- **FUTURE**: uma indicação de que um teste, tratamento ou procedimento se refere a uma ação ou evento que ocorrerá após o assunto das notas.
- **HYPOTHETICAL**: uma indicação de que um teste, tratamento ou procedimento é expresso como uma hipótese
- **NEGATION**: uma indicação de que um resultado ou ação é negativo ou não está sendo executado.

- PAST\_HISTORY: uma indicação de que um teste, tratamento ou procedimento é do passado do paciente (antes do encontro atual).

## Detalhes do SNOMED CT

Incluídos na resposta JSON estão os detalhes do SNOMED CT, que incluem as seguintes informações:

- EDITION: Somente a edição dos EUA é compatível.
- VERSIONDATE: O carimbo de data da versão SNOMED CT usada.
- LANGUAGE: A análise no idioma inglês (US-EN) é compatível.

## Exemplos de entrada e resposta

### Note

Consulte a sintaxe específica de entrada e resposta da API em [InferSNOMEDCT](#) na Referência de API do Amazon Comprehend Medical.

O exemplo de texto de entrada a seguir mostra como a operação InferSNOMEDCT funciona. Para ver todo o texto de entrada, role sobre o botão Copiar.

```
"HEENT : Boggy inferior turbinates, No oropharyngeal lesion"
```

A operação InferSNOMEDCT retorna a saída a seguir no formato JSON.

```
{
  "Entities": [
    {
      "Category": "ANATOMY",
      "BeginOffset": 0,
      "EndOffset": 5,
      "Text": "HEENT",
      "Traits": [],
      "SNOMEDCTConcepts": [
        {
          "Code": "69536005",
```

```

        "Score": Float,
        "Description": "Head structure (body structure)"
    },
    {
        "Code": "429031000124106",
        "Score": Float,
        "Description": "Review of systems, head, ear, eyes, nose and throat
(procedure)"
    },
    {
        "Code": "385383008",
        "Score": Float,
        "Description": "Ear, nose and throat structure (body structure)"
    },
    {
        "Code": "64237003",
        "Score": Float,
        "Description": "Structure of left half of head (body structure)"
    },
    {
        "Code": "113028003",
        "Score": Float,
        "Description": "Ear, nose and throat examination (procedure)"
    }
],
"Score": Float,
"Attributes": [],
"Type": "SYSTEM_ORGAN_SITE",
"Id": 0
},
{
    "Category": "MEDICAL_CONDITION",
    "BeginOffset": 8,
    "EndOffset": 33,
    "Text": "Boggy inferior turbinates",
    "Traits": [
        {
            "Score": Float,
            "Name": "SIGN"
        }
    ],
    "SNOMEDCTConcepts": [
        {
            "Code": "254477009",

```

```

        "Score": Float,
        "Description": "Tumor of inferior turbinate (disorder)"
    },
    {
        "Code": "260762006",
        "Score": Float,
        "Description": "Choroidal invasion status (attribute)"
    },
    {
        "Code": "2455009",
        "Score": Float,
        "Description": "Revision of lumbosubarachnoid shunt (procedure)"
    },
    {
        "Code": "19883003",
        "Score": Float,
        "Description": "Atrophy of nasal turbinates (disorder)"
    },
    {
        "Code": "256723009",
        "Score": Float,
        "Description": "Inferior turbinate flap (substance)"
    }
],
"Score": Float,
"Attributes": [
    {
        "Category": "ANATOMY",
        "RelationshipScore": Float,
        "EndOffset": 5,
        "Text": "HEENT",
        "Traits": [],
        "SNOMEDCTConcepts": [
            {
                "Code": "69536005",
                "Score": Float,
                "Description": "Head structure (body structure)"
            },
            {
                "Code": "429031000124106",
                "Score": Float,
                "Description": "Review of systems, head, ear, eyes, nose
and throat (procedure)"
            }
        ]
    }
],

```

```

        {
            "Code": "385383008",
            "Score": Float,
            "Description": "Ear, nose and throat structure (body
structure)"
        },
        {
            "Code": "64237003",
            "Score": Float,
            "Description": "Structure of left half of head (body
structure)"
        },
        {
            "Code": "113028003",
            "Score": Float,
            "Description": "Ear, nose and throat examination
(procedure)"
        }
    ],
    "Score": Float,
    "RelationshipType": "SYSTEM_ORGAN_SITE",
    "Type": "SYSTEM_ORGAN_SITE",
    "Id": 0,
    "BeginOffset": 0
}
],
"Type": "DX_NAME",
"Id": 1
},
{
    "Category": "ANATOMY",
    "BeginOffset": 23,
    "EndOffset": 33,
    "Text": "turbinates",
    "Traits": [],
    "SNOMEDCTConcepts": [
        {
            "Code": "310607007",
            "Score": Float,
            "Description": "Sarcoidosis of inferior turbinates (disorder)"
        },
        {
            "Code": "80153006",
            "Score": Float,

```

```

        "Description": "Segmented neutrophil (cell)"
    },
    {
        "Code": "46607005",
        "Score": Float,
        "Description": "Nasal turbinate structure (body structure)"
    },
    {
        "Code": "6553002",
        "Score": Float,
        "Description": "Inferior nasal turbinate structure (body
structure)"
    },
    {
        "Code": "254477009",
        "Score": Float,
        "Description": "Tumor of inferior turbinate (disorder)"
    }
],
"Score": Float,
"Attributes": [],
"Type": "SYSTEM_ORGAN_SITE",
"Id": 3
},
{
    "Category": "ANATOMY",
    "BeginOffset": 39,
    "EndOffset": 52,
    "Text": "oropharyngeal",
    "Traits": [],
    "SNOMEDCTConcepts": [
        {
            "Code": "31389004",
            "Score": Float,
            "Description": "Oropharyngeal structure (body structure)"
        },
        {
            "Code": "33431000119109",
            "Score": Float,
            "Description": "Lesion of oropharynx (disorder)"
        },
        {
            "Code": "263376008",
            "Score": Float,

```

```

        "Description": "Entire oropharynx (body structure)"
    },
    {
        "Code": "716151000",
        "Score": Float,
        "Description": "Structure of oropharynx and/or hypopharynx and/or
larynx (body structure)"
    },
    {
        "Code": "764786007",
        "Score": Float,
        "Description": "Oropharyngeal (intended site)"
    }
],
"Score": Float,
"Attributes": [],
"Type": "SYSTEM_ORGAN_SITE",
"Id": 5
},
{
    "Category": "MEDICAL_CONDITION",
    "BeginOffset": 39,
    "EndOffset": 59,
    "Text": "oropharyngeal lesion",
    "Traits": [
        {
            "Score": Float,
            "Name": "SIGN"
        }
    ],
    "SNOMEDCTConcepts": [
        {
            "Code": "31389004",
            "Score": Float,
            "Description": "Oropharyngeal structure (body structure)"
        },
        {
            "Code": "33431000119109",
            "Score": Float,
            "Description": "Lesion of oropharynx (disorder)"
        },
        {
            "Code": "764786007",
            "Score": Float,

```

```

        "Description": "Oropharyngeal (intended site)"
    },
    {
        "Code": "418664002",
        "Score": Float,
        "Description": "Oropharyngeal route (qualifier value)"
    },
    {
        "Code": "110162001",
        "Score": Float,
        "Description": "Abrasion of oropharynx (disorder)"
    }
],
"Score": Float,
"Attributes": [
    {
        "Category": "ANATOMY",
        "RelationshipScore": Float,
        "EndOffset": 5,
        "Text": "HEENT",
        "Traits": [],
        "SNOMEDCTConcepts": [
            {
                "Code": "69536005",
                "Score": Float,
                "Description": "Head structure (body structure)"
            },
            {
                "Code": "429031000124106",
                "Score": Float,
                "Description": "Review of systems, head, ear, eyes, nose
and throat (procedure)"
            },
            {
                "Code": "385383008",
                "Score": Float,
                "Description": "Ear, nose and throat structure (body
structure)"
            },
            {
                "Code": "64237003",
                "Score": Float,
                "Description": "Structure of left half of head (body
structure)"
            }
        ]
    }
]

```

```

        },
        {
            "Code": "113028003",
            "Score": Float,
            "Description": "Ear, nose and throat examination
(procedure)"
        }
    ],
    "Score": Float,
    "RelationshipType": "SYSTEM_ORGAN_SITE",
    "Type": "SYSTEM_ORGAN_SITE",
    "Id": 0,
    "BeginOffset": 0
}
],
"Type": "DX_NAME",
"Id": 4
}
],
"SNOMEDCTDetails": {
    "Edition": "US",
    "VersionDate": "20200901",
    "Language": "en"
},
"Characters": {
    "OriginalTextCharacters": 59
},
"ModelVersion": "3.3.0.20220301"
}

```

## Vinculação de ontologias a análises em lote

Use o Amazon Comprehend Medical para detectar entidades em textos clínicos armazenados em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e para vincular essas entidades a ontologias padronizadas. Você pode usar a análise em lote de vinculações de ontologia para analisar um conjunto de documentos ou um único documento com até 20.000 caracteres. Usando o console ou a ontologia que vincula operações de APIs em lote, você pode realizar operações para iniciar, interromper, listar e descrever trabalhos de análise em lote em andamento.

Para obter informações sobre preços de análise em lote e outras operações do Amazon Comprehend Medical, consulte [Preços do Amazon Comprehend Medical](#).

## Realizar a análise em lote

Você pode executar um trabalho de análise em lote usando o console do Amazon Comprehend Medical ou as operações de APIs em lote do Amazon Comprehend Medical.

### Executar análise em lote usando operações de APIs

#### Pré-requisitos

Ao usar a API do Amazon Comprehend Medical, crie uma política do AWS Identity Access and Management (IAM) e anexe-a a um perfil do IAM. Para saber mais sobre as políticas de confiança e os perfis do IAM, consulte [Políticas e permissões do IAM](#).

1. Faça upload de seus dados em um bucket do S3.
2. Para iniciar um novo trabalho de análise, use `Start ICD10 CMInference Job`, `Start SNOMEDCTInference Job` ou as `StartRxNormInferenceJob` operações. Forneça o nome do bucket do Amazon S3 que contém os arquivos de entrada e o nome do bucket do Amazon S3 para o qual você deseja enviar os arquivos de saída.
3. Monitore o progresso do trabalho usando `Describe ICD10 CMInference Job`, `SNOMEDCTInferenceDescribe Job` ou `DescribeRxNormInferenceJob` operações. Além disso, você pode usar `List ICD10 CMInference Jobs`, `List SNOMEDCTInference Jobs` e `ListRxNormInferenceJobs` para ver o status de todas as ontologias que vinculam trabalhos de análise em lote.
4. Se você precisar interromper um trabalho em andamento, use `Stop ICD10 CMInference Job`, `Stop SNOMEDCTInference Job` ou `StopRxNormInferenceJob` para interromper a análise.
5. Para ver os resultados do seu trabalho de análise, consulte o bucket do S3 de saída que você configurou ao iniciar o trabalho.

### Executar análise em lote usando o console

1. Faça upload de seus dados em um bucket do S3.
2. Para iniciar um novo trabalho de análise, selecione o tipo de análise que você executará. Em seguida, forneça o nome do bucket do S3 que contém os arquivos de entrada e o nome do bucket do S3 para o qual você deseja enviar os arquivos de saída.

3. Monitore o status do seu trabalho enquanto ele estiver em andamento. No console, você pode visualizar todas as operações de análise em lote e seu status, incluindo quando a análise foi iniciada e finalizada.
4. Para ver os resultados do seu trabalho de análise, consulte o bucket do S3 de saída que você configurou ao iniciar o trabalho.

## Políticas do IAM para operações em lote

O perfil do IAM que chama as operações de APIs em lote do Amazon Comprehend Medical deve ter uma política que conceda acesso aos buckets do S3 que contêm os arquivos de entrada e saída. O perfil do IAM também deve receber uma relação de confiança que permite que o serviço do Amazon Comprehend Medical assuma a função. Para saber mais sobre as políticas de confiança e os perfis do IAM, consulte [Perfis do IAM](#).

O perfil deve ter a política a seguir:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::input-bucket/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::input-bucket",
        "arn:aws:s3:::output-bucket"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```

    {
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::output-bucket/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

O perfil deve ter a relação de confiança a seguir. É recomendável usar as chaves de condição `aws:SourceAccount` ou `aws:SourceArn` para evitar o problema de segurança "confused deputy". Para saber mais sobre o problema do delegado confuso e como proteger sua AWS conta, consulte [O problema do deputado confuso](#) na documentação do IAM.

## JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "comprehendmedical.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account_id"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:comprehendmedical:us-east-1:account_id:*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

## Arquivos de saída de análise em lote

O Amazon Comprehend Medical cria um arquivo de saída para cada arquivo de entrada no lote. O arquivo tem a extensão `.out`. O Amazon Comprehend Medical primeiro cria um diretório no bucket S3 de saída usando o `AwsAccountId - JobType - JobId` como nome e, em seguida, grava todos os arquivos de saída do lote nesse diretório. O Amazon Comprehend Medical cria esse novo diretório para que a saída de um trabalho não substitua a saída de outro.

A operação em lote produz a mesma saída de uma operação síncrona.

Cada operação em lote produz os três arquivos de manifesto a seguir que contêm informações sobre o trabalho:

- **Manifest**: resume o trabalho. Fornece informações sobre os parâmetros usados para a tarefa, o tamanho total da tarefa e o número de arquivos processados.
- **Success**: fornece informações sobre os arquivos que foram processados com êxito. Inclui o nome do arquivo de entrada e saída e o tamanho do arquivo de entrada.
- **Unprocessed**: lista os arquivos que o trabalho em lote não processou com códigos de erro e mensagens de erro por arquivo.

O Amazon Comprehend Medical grava os arquivos no diretório de saída que você especificou para o trabalho em lotes. O arquivo de resumo do manifesto será gravado na pasta de saída, junto com uma pasta chamada `Manifest_AccountId-Operation-JobId`. Dentro da pasta do manifesto está a pasta `success`, que contém o manifesto de sucesso, e a pasta `failed`, que contém o manifesto do arquivo não processado. As seções a seguir mostram a estrutura dos arquivos do manifesto.

### Arquivo de manifesto em lote

Veja a seguir a estrutura JSON do arquivo do manifesto em lote.

```
{"Summary" :
  {"Status" : "COMPLETED | FAILED | PARTIAL_SUCCESS | STOPPED",
  "JobType" : "ICD10CMIInference | RxNormInference | SNOMEDCTInference",
  "InputDataConfiguration" : {
```

```

    "Bucket" : "input bucket",
    "Path" : "path to files/account ID-job type-job ID"
  }, "OutputDataConfiguration" : {
    "Bucket" : "output bucket",
    "Path" : "path to files"
  },
  "InputFileCount" : number of files in input bucket,
  "TotalMeteredCharacters" : total characters processed from all files,
  "UnprocessedFilesCount" : number of files not processed,
  "SuccessFilesCount" : total number of files processed,
  "TotalDurationSeconds" : time required for processing,
  "SuccessfulFilesListLocation" : "path to file",
  "UnprocessedFilesListLocation" : "path to file",
  "FailedJobErrorMessage": "error message or if not applicable,
    The status of the job is completed"
}
}

```

## Arquivo de manifesto de sucesso

Veja a seguir a estrutura JSON do arquivo que contém informações sobre arquivos processados com êxito.

```

{
  "Files": [{
    "Input": "input path/input file name",
    "Output": "output path/output file name",
    "InputSize": size in bytes of input file
  },
  {
    "Input": "input path/input file name",
    "Output": "output path/output file name",
    "InputSize": size in bytes of input file
  }
]
}

```

## Arquivo de manifesto não processado

Veja a seguir a estrutura JSON do arquivo de manifesto que contém informações sobre arquivos não processados.

```

{

```

```
"Files" : [ {  
  "Input": "file_name_that_failed",  
  "ErrorCode": "error code for exception",  
  "ErrorMessage": "explanation of the error code and suggestions"  
},  
{ ...}  
]  
}
```

# Segurança no Amazon Comprehend Medical

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de uma arquitetura de data center e rede criada para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

- Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Third-party auditores testam e verificam regularmente a eficácia de nossa segurança como parte dos Programas de Conformidade Programas de [AWS](#) de . Para saber mais sobre os programas de conformidade que se aplicam ao Amazon Comprehend Medical, consulte [Serviços da AWS em escopo por programa de conformidade](#)
- Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Essa documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o Amazon Comprehend Medical. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Amazon Comprehend Medical para atender aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também aprenderá a usar outros serviços da AWS que ajudam você a monitorar e proteger seus recursos do Amazon Comprehend Medical.

## Tópicos

- [Proteção de dados no Amazon Comprehend Medical](#)
- [Identity and Access Management no Amazon Comprehend Medical](#)
- [Registro de chamadas da API Amazon Comprehend Medical usando AWS CloudTrail](#)
- [Validação de conformidade do Amazon Comprehend Medical](#)
- [Resiliência no Amazon Comprehend Medical](#)
- [Segurança de infraestrutura no Amazon Comprehend Medical](#)

# Proteção de dados no Amazon Comprehend Medical

O modelo de [responsabilidade AWS compartilhada O modelo](#) de se aplica à proteção de dados no Amazon Comprehend Medical. Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre privacidade de dados, consulte [Perguntas frequentes sobre privacidade de dados](#). Para obter informações sobre proteção de dados na Europa, consulte o [Centro de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados \(RGPD\)](#).

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS os recursos. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sensíveis armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para saber mais sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sensíveis, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com o Comprehend Medical ou Serviços da AWS outro usando o console, a API AWS CLI ou os SDKs. AWS Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos

de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

## Identity and Access Management no Amazon Comprehend Medical

O acesso ao Comprehend Medical exige credenciais que a AWS possa usar para autenticar suas solicitações. Essas credenciais devem ter permissões para acessar as ações do Comprehend Medical. [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) pode ajudar a proteger seus recursos controlando quem pode acessá-los. As seções a seguir fornecem detalhes sobre como você pode usar o IAM com o Comprehend Medical.

- [Autenticação](#)
- [Controle de acesso](#)

### Autenticação

Você deve fornecer ao usuário permissões para interagir com o Amazon Comprehend Medical. Para usuários que precisam de acesso total, use `ComprehendMedicalFullAccess`.

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em Centro de Identidade do AWS IAM:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:

- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para usar as operações assíncronas do Amazon Comprehend Medical, você também precisa de um perfil de serviço.

O perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para saber mais, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para saber mais sobre como especificar o Amazon Comprehend Medical como a entidade principal, consulte [Permissões baseadas em funções necessárias para operações em lote](#).

## Controle de acesso

Você precisa ter credenciais válidas para autenticar suas solicitações. As credenciais devem ter permissões para chamar uma ação do Amazon Comprehend Medical.

As seções a seguir descrevem como gerenciar permissões para o Amazon Comprehend Medical. Recomendamos que você leia a visão geral primeiro.

- [Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos do Amazon Comprehend Medical](#)
- [Usar políticas baseadas em identidade \(políticas do IAM\) para o Amazon Comprehend Medical](#)

### Tópicos

- [Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos do Amazon Comprehend Medical](#)
- [Usar políticas baseadas em identidade \(políticas do IAM\) para o Amazon Comprehend Medical](#)
- [Permissões da API do Amazon Comprehend Medical: referência de ações, recursos e condições](#)
- [AWS políticas gerenciadas para o Amazon Comprehend Medical](#)

## Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos do Amazon Comprehend Medical

As políticas de permissões regem o acesso a uma ação. Um administrador da conta anexa políticas de permissões às identidades do IAM para gerenciar o acesso às ações. As identidades do IAM incluem usuários, grupos e funções.

**Note**

Um administrador da conta (ou usuário administrador) é um usuário com privilégios de administrador. Para obter mais informações, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Ao conceder permissões, você decide quem e o que as receberá.

**Tópicos**

- [Gerenciar o acesso a ações](#)
- [Especificar elementos da política: ações, efeitos e entidades principais](#)
- [Especificar condições em uma política](#)

**Gerenciar o acesso a ações**

Uma política de permissões descreve quem tem acesso a quê. A seção a seguir explica as opções de políticas de permissões.

**Note**

Esta seção explica o IAM no contexto do Amazon Comprehend Medical. Não são fornecidas informações detalhadas sobre o serviço IAM. Para saber mais sobre o IAM, consulte [O que é o IAM?](#) no Guia do usuário do IAM. Para obter informações sobre a sintaxe e as descrições da política do IAM, consulte [Referência de política do IAM da AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

As políticas anexadas a uma identidade do IAM são políticas baseadas em identidade. As políticas anexadas a um recurso são chamadas de políticas baseadas em recursos. O Amazon Comprehend Medical oferece suporte apenas a políticas baseadas em identidade.

**Políticas baseadas em identidade (políticas do IAM)**

É possível anexar políticas a identidades do IAM. Veja dois exemplos a seguir.

- Anexe uma política de permissões a um usuário ou grupo na sua conta. Para permitir que um usuário ou um grupo de usuários chame uma ação do Amazon Comprehend Medical, anexe uma política de permissões a um usuário. Anexe uma política a um grupo que contém o usuário.
- Anexe uma política de permissões a uma função para conceder permissões entre contas. Para conceder permissões entre contas, anexe uma política baseada em identidade a um perfil do IAM. Por exemplo, o administrador na conta A pode criar uma função para conceder permissões entre contas a outra conta. Neste exemplo, chame-a de Conta B, que também pode ser um serviço da AWS.
  1. Um administrador da Conta A cria um perfil do IAM e anexa uma política à função que concede permissões para o uso de recursos na Conta A.
  2. O administrador da conta A associa uma política de confiança à função. A política identifica a conta B como a entidade principal que pode assumir a função.
  3. O administrador da Conta B poderá então delegar permissões para assumir a função para todos os usuários na Conta B. Isso permitirá que os usuários da Conta B criem ou acessem recursos da Conta A. Se você quiser conceder a um serviço da AWS permissões para assumir a função, a entidade principal na política de confiança também poderá ser a entidade principal do serviço da AWS.

Para obter mais informações sobre o uso do IAM para delegar permissões, consulte [Gerenciamento de acesso](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre o uso de políticas baseadas em identidade com o Amazon Comprehend Medical, consulte [Usar políticas baseadas em identidade \(políticas do IAM\) para o Amazon Comprehend Medical](#). Para obter mais informações sobre usuários, grupos, funções e permissões, consulte [Identicidades \(usuários, grupos e funções\)](#) no Guia do usuário do IAM.

## Políticas baseadas em recursos

Outros serviços, como AWS Lambda, oferecem suporte a políticas de permissões baseadas em recursos. Por exemplo: você pode anexar uma política a um bucket do S3 para gerenciar permissões de acesso a esse bucket. O Amazon Comprehend Medical não oferece suporte a políticas baseadas em recursos.

## Especificar elementos da política: ações, efeitos e entidades principais

O Amazon Comprehend Medical define um conjunto de operações da API. Para conceder permissões para essas operações de API, o Amazon Comprehend Medical define um conjunto de ações que você pode especificar em uma política.

Os quatro itens aqui são os elementos de política mais básicos.

- **Recurso:** em uma política, você usa um nome do recurso da Amazon (ARN) para identificar o recurso a que a política se aplica. Para o Amazon Comprehend Medical, o recurso é sempre "\*".
- **Ação:** use palavras-chave de ação para identificar as operações que deseja permitir ou negar. Por exemplo, dependendo do efeito especificado, `comprehendmedical:DetectEntities` permite ou nega as permissões ao usuário para executar a operação `DetectEntities` do Amazon Comprehend Medical.
- **Efeito:** especifique o efeito da ação que ocorre quando o usuário solicita a ação específica (permitir ou negar). Se você não conceder (permitir) explicitamente acesso a um recurso, o acesso estará implicitamente negado. Você também pode negar acesso explicitamente a um recurso. Você poderia fazer isso para garantir que um usuário não possa acessar o recurso, mesmo se uma política diferente conceder o acesso.
- **Entidade principal:** em políticas baseadas em identidade, o usuário ao qual a política é anexada é a entidade principal implícita.

Para saber mais sobre a sintaxe e as descrições da política do IAM, consulte a [Referência da política do IAM da AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter uma tabela que mostra todas as ações de API do Amazon Comprehend Medical, consulte [Permissões da API do Amazon Comprehend Medical: referência de ações, recursos e condições](#).

## Especificar condições em uma política

Ao conceder permissões, você usa a linguagem da política do IAM para especificar as condições sob as quais uma política deverá entrar em vigor. Por exemplo, é recomendável aplicar uma política somente após uma data específica. Para obter mais informações sobre como especificar condições em uma linguagem de política, consulte [Condition](#) no Guia do usuário do IAM.

A AWS fornece um conjunto de chaves de condição predefinidas para todos os serviços da AWS que oferecem suporte ao IAM para controle de acesso. Por exemplo, você pode usar a chave de condição `aws:user:uid` para exigir um ID da AWS específico ao solicitar uma ação. Para obter mais

informações e uma lista completa das chaves da AWS, consulte [Chaves disponíveis para condições](#) no Guia do usuário do IAM.

O Amazon Comprehend Medical não fornece nenhuma chave de condição adicional.

## Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para o Amazon Comprehend Medical

Este tópico mostra exemplos de políticas com base em identidade. Os exemplos descrevem como uma conta pode associar políticas de permissões a identidades do IAM. Isso permite que usuários, grupos e funções realizem ações do Amazon Comprehend Medical.

### Important

Para entender as permissões, recomendamos [Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos do Amazon Comprehend Medical](#).

Esse exemplo de política é necessário para usar as ações de análise de documentos do Amazon Comprehend Medical.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDetectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "comprehendmedical:DetectEntitiesV2",
        "comprehendmedical:DetectPHI",
        "comprehendmedical:StartEntitiesDetectionV2Job",
        "comprehendmedical:ListEntitiesDetectionV2Jobs",
        "comprehendmedical:DescribeEntitiesDetectionV2Job",
        "comprehendmedical:StopEntitiesDetectionV2Job",
        "comprehendmedical:StartPHIDetectionJob",
        "comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs",
        "comprehendmedical:DescribePHIDetectionJob",
        "comprehendmedical:StopPHIDetectionJob",
        "comprehendmedical:StartRxNormInferenceJob",

```

```

        "comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs",
        "comprehendmedical:DescribeRxNormInferenceJob",
        "comprehendmedical:StopRxNormInferenceJob",
        "comprehendmedical:StartICD10CMInferenceJob",
        "comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs",
        "comprehendmedical:DescribeICD10CMInferenceJob",
        "comprehendmedical:StopICD10CMInferenceJob",
        "comprehendmedical:StartSNOMEDCTInferenceJob",
        "comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs",
        "comprehendmedical:DescribeSNOMEDCTInferenceJob",
        "comprehendmedical:StopSNOMEDCTInferenceJob",
        "comprehendmedical:InferRxNorm",
        "comprehendmedical:InferICD10CM",
        "comprehendmedical:InferSNOMEDCT"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

A política tem uma instrução que concede permissão para usar as ações DetectEntities e DetectPHI.

A política não especifica o elemento Principal, porque não se especifica o principal que obtém as permissões em uma política baseada em identidade. Quando você anexar uma política a um usuário, o usuário será a entidade principal implícita. Quando você anexa uma política a um perfil do IAM, a entidade principal identificada na política de confiança do perfil obtém a permissão.

Para ver todas as ações da API Amazon Comprehend Medical e os recursos aos quais elas se aplicam, consulte [Permissões da API do Amazon Comprehend Medical: referência de ações, recursos e condições](#).

## Permissões necessárias para usar o console do Amazon Comprehend Medical

A tabela de referência de permissões lista as operações de API do Amazon Comprehend Medical e mostra as permissões necessárias para cada operação. Para obter mais informações sobre as permissões da API do Amazon Comprehend Medical, consulte [Permissões da API do Amazon Comprehend Medical: referência de ações, recursos e condições](#).

Para usar o console do Amazon Comprehend Medical, é necessário conceder permissões para as ações exibidas na política a seguir:

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "comprehendmedical.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

O console do Amazon Comprehend Medical precisa dessas permissões pelos seguintes motivos:

- Permissões do iam para listar os perfis do IAM disponíveis para sua conta.
- Permissões do s3 para acessar buckets e objetos do Amazon S3 que contêm os dados.

Ao criar um trabalho em lote assíncrono usando o console, você também pode criar um perfil do IAM para seu trabalho. Para criar um perfil do IAM usando o console, os usuários devem receber as permissões adicionais mostradas aqui para criar funções e políticas do IAM e anexar políticas às funções.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

O console do Amazon Comprehend Medical precisa dessas permissões para criar funções e políticas e anexar funções e políticas. A ação `iam:PassRole` permite que o console passe a função para o Amazon Comprehend Medical.

### Políticas gerenciadas (predefinidas) pela AWS para o Amazon Comprehend Medical

A AWS resolve muitos casos de uso comuns fornecendo políticas do IAM autônomas criadas e administradas pela AWS. Essas políticas gerenciadas pela AWS concedem permissões necessárias para casos de uso comuns, de maneira que você possa evitar a necessidade de investigar quais permissões são necessárias. Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

A seguinte política gerenciada pela AWS, que você pode anexar a usuários em sua conta, é específica do Amazon Comprehend Medical.

- `ComprehendMedicalFullAccess`— Concede acesso total aos recursos do Amazon Comprehend Medical. Inclui permissão para listar e obter perfis do IAM.

Você deve aplicar a seguinte política adicional a qualquer usuário que utilize o Amazon Comprehend Medical:

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "comprehendmedical.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

É possível analisar as políticas de permissões gerenciadas fazendo login no console do IAM e pesquisando políticas específicas.

Essas políticas funcionam quando você está usando a AWS SDKs ou a AWS CLI.

Você também pode criar as próprias políticas do IAM personalizadas para conceder permissões para ações e recursos do Amazon Comprehend Medical. É possível anexar essas políticas personalizadas aos usuários ou grupos do IAM que necessitam delas.

### Permissões baseadas em funções necessárias para operações em lote

Para usar as operações assíncronas do Amazon Comprehend Medical, conceda ao Amazon Comprehend Medical acesso ao bucket do Amazon S3 que contém sua coleção de documentos. Para isso, crie uma função de acesso a dados em sua conta para confiar na entidade principal de serviço do Amazon Comprehend Medical. Para obter mais informações sobre como criar uma função, consulte [Criar uma função para delegar permissões a um serviço da AWS](#) no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management.

Veja a seguir a política de confiança da função.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "comprehendmedical.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Depois de criar a função, crie uma política de acesso para ela. A política deve conceder ao Amazon S3 as permissões `GetObject` e `ListBucket` ao bucket do Amazon S3 que contém seus dados de entrada. Ela também concede permissões a `PutObject` do Amazon S3 ao seu bucket de dados de saída do Amazon S3.

O exemplo de política de acesso a seguir contém essas permissões.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::input bucket/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],

```

```
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::input_bucket"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::output_bucket/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]
```

## Exemplos de política gerenciada pelo cliente

Nesta seção, você pode encontrar exemplos de políticas de usuário que concedem permissões para várias ações do Amazon Comprehend Medical. Essas políticas funcionam quando você está usando a AWS SDKs ou a AWS CLI. Ao usar o console, você deve conceder permissões a todo o Amazon Comprehend Medical. APIs Isso é discutido em [Permissões necessárias para usar o console do Amazon Comprehend Medical](#).

### Note

Todos os exemplos usam a região us-east-2 e contêm uma conta fictícia. IDs

## Exemplos

### Exemplo 1: permitir todas as ações do Amazon Comprehend Medical

Depois de se inscrever AWS, você cria um administrador para gerenciar sua conta, incluindo a criação de usuários e o gerenciamento de suas permissões.

Você pode escolher criar um usuário que tenha permissões para todas as ações do Amazon Comprehend. Pense nesse usuário como um administrador específico do serviço para trabalhar com o Amazon Comprehend. Você pode anexar a política de permissões a seguir para este usuário.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AllowAllComprehendMedicalActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "comprehendmedical:*"],
    "Resource": "*"
  ]
}
```

Exemplo 2: Permitir somente DetectEntities ações

A política de permissões a seguir concede permissões ao usuário para detectar entidades no Amazon Comprehend Medical, mas não para detectar operações de PHI.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDetectEntityActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "comprehendmedical:DetectEntitiesV2"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Permissões da API do Amazon Comprehend Medical: referência de ações, recursos e condições

Use a tabela a seguir como referência ao configurar o [Controle de acesso](#) e escrever uma política de permissões que você possa anexar a um usuário. A lista inclui cada operação da API do Amazon Comprehend Medical, a ação correspondente à qual você pode conceder permissões para realizar a ação e o recurso da AWS ao qual pode conceder as permissões. Você especifica as ações no campo `Action` da política e o valor do recurso no campo `Resource` da política.

Para expressar condições, você pode usar as chaves de condição em toda a AWS nas suas políticas do Amazon Comprehend Medical. Para obter uma lista completa das chaves, consulte [Chaves disponíveis](#) no Guia do usuário do IAM.

### Note

Para especificar uma ação, use o prefixo `comprehendmedical:` seguido do nome da operação da API, por exemplo, `comprehendmedical:DetectEntities`.

## AWS políticas gerenciadas para o Amazon Comprehend Medical

Uma política AWS gerenciada é uma política autônoma criada e administrada por AWS. AWS as políticas gerenciadas são projetadas para fornecer permissões para muitos casos de uso comuns, para que você possa começar a atribuir permissões a usuários, grupos e funções.

Lembre-se de que as políticas AWS gerenciadas podem não conceder permissões de privilégio mínimo para seus casos de uso específicos porque elas estão disponíveis para uso de todos os AWS clientes. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo as [políticas gerenciadas pelo cliente](#) que são específicas para seus casos de uso.

Você não pode alterar as permissões definidas nas políticas AWS gerenciadas. Se AWS atualizar as permissões definidas em uma política AWS gerenciada, a atualização afetará todas as identidades principais (usuários, grupos e funções) às quais a política está anexada. AWS é mais provável que atualize uma política AWS gerenciada quando uma nova AWS service (Serviço da AWS) for lançada ou novas operações de API forem disponibilizadas para serviços existentes.

Para saber mais, consulte [AWS Políticas gerenciadas pela](#) no Guia do usuário do IAM.

## Tópicos

- [AWS política gerenciada: ComprehendMedicalFullAccess](#)
- [Atualizações do Amazon Comprehend Medical para políticas gerenciadas AWS](#)

## AWS política gerenciada: ComprehendMedicalFullAccess

É possível anexar a política `ComprehendMedicalFullAccess` às suas identidades do IAM.

Essa política concede permissão administrativa para todas as ações do Amazon Comprehend Medical.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "comprehendmedical:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Atualizações do Amazon Comprehend Medical para políticas gerenciadas AWS

Veja detalhes sobre as atualizações das políticas AWS gerenciadas do Amazon Comprehend Medical desde que esse serviço começou a monitorar essas mudanças. Para receber alertas automáticos sobre alterações realizadas nesta página, assine o feed RSS na [página de histórico do documento do](#) .

Alteração	Descrição	Data
O Amazon Comprehend Medical começou a monitorar as mudanças	O Amazon Comprehend Medical começou a monitorar as mudanças em suas políticas gerenciadas. AWS	27 de novembro de 2018

## Registro de chamadas da API Amazon Comprehend Medical usando AWS CloudTrail

O Amazon Comprehend Medical está integrado com o AWS CloudTrail. CloudTrail é um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, uma função ou um AWS serviço dentro do Amazon Comprehend Medical. CloudTrail captura todas as chamadas de API para o Amazon Comprehend Medical como eventos. As chamadas capturadas incluem as chamadas do console do Amazon Comprehend Medical e as chamadas de código para as operações da API do Amazon Comprehend Medical. Se você criar uma trilha, poderá permitir a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o Amazon Comprehend Medical. Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos mais recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar várias coisas, como:

- A solicitação feita ao Amazon Comprehend Medical
- O endereço IP do qual a solicitação foi feita.
- Quem fez a solicitação.
- Quando a solicitação foi feita
- Outros detalhes

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

## Informações do Amazon Comprehend Medical em CloudTrail

CloudTrail é ativado em sua AWS conta quando você cria a conta. Quando a atividade ocorre no Amazon Comprehend Medical, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com

outros eventos de AWS serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes em sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos](#).

Para obter um registro contínuo dos eventos em sua AWS conta, incluindo eventos do Amazon Comprehend Medical, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as regiões da AWS. A trilha registra eventos de todas as regiões na AWS partição e entrega os arquivos de log ao bucket do Amazon S3 que você especificar. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros.

Para saber mais, consulte:

- [Visão Geral para Criar uma Trilha](#)
- [CloudTrail Serviços e integrações compatíveis](#)
- [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões](#) e [recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#)

[Todas as ações do Amazon Comprehend Medical são registradas CloudTrail e documentadas na Amazon Comprehend Medical API Reference](#). Por exemplo, chamadas para o DetectEntitiesV2 DetectPHI e ListEntitiesDetectionV2Jobs as ações geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário root ou AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de um perfil ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

## Noções básicas sobre entradas do arquivo de log do Amazon Comprehend Medical

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma solicitação única de qualquer fonte. O evento inclui informações sobre a ação solicitada, como data e hora ou parâmetros da solicitação. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a DetectEntitiesV2 ação.

```
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mateo_Jackson",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "ASIAXHKUFODNN8EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mateo_Jackson",
            "accountId": "123456789012",
            "userName": "Mateo_Jackson"
          },
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-09-27T20:07:27Z"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2019-09-27T20:10:26Z",
      "eventSource": "comprehendmedical.amazonaws.com",
      "eventName": "DetectEntitiesV2",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "702.21.198.166",
```

```
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.590  
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.212-b03  
java/1.8.0_212 vendor/Oracle_Corporation",  
    "requestParameters": null,  
    "responseElements": null,  
    "requestID": "8d85f2ec-EXAMPLE",  
    "eventID": "ae9be9b1-EXAMPLE",  
    "eventType": "AwsApiCall",  
    "recipientAccountId": "123456789012"  
}
```

## Validação de conformidade do Amazon Comprehend Medical

Third-party os auditores avaliam a segurança e a conformidade do Amazon Comprehend Medical como parte de vários programas de conformidade. AWS Isso inclui PCI, FedRAMP, HIPAA e outros. Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Download de relatórios no AWS Artifact](#).

Sua responsabilidade de conformidade ao usar o Amazon Comprehend Medical é determinada pela confidencialidade dos seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. AWS fornece os seguintes recursos para ajudar na conformidade:

- [Guias de início rápido de segurança e conformidade](#) – Esses guias de implantação discutem considerações sobre arquitetura e fornecem medidas para implantar ambientes de linha de base focados em segurança e conformidade na AWS.
- Documento técnico [sobre arquitetura para segurança e conformidade com a HIPAA — Este whitepaper](#) descreve como as empresas podem usar para criar aplicativos. AWS HIPAA-compliant
- [AWS Recursos de conformidade](#) — Essa coleção de pastas de trabalho e guias pode ser aplicada ao seu setor e local.
- [AWS Config](#)— Esse AWS serviço avalia se suas configurações de recursos estão em conformidade com as práticas internas, as diretrizes e os regulamentos do setor.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Esse AWS serviço fornece uma visão abrangente do seu estado de segurança interno, AWS que ajuda você a verificar sua conformidade com os padrões e as melhores práticas do setor de segurança.

Para obter uma lista de AWS serviços no escopo de programas de conformidade específicos, consulte [AWS Services in Scope by Compliance Program](#). Para obter informações gerais, consulte [Programas de conformidade da AWS](#).

## Resiliência no Amazon Comprehend Medical

A infraestrutura AWS global é construída em torno de AWS regiões e zonas de disponibilidade. AWS As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que executam o failover automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte [Infraestrutura AWS global](#).

## Segurança de infraestrutura no Amazon Comprehend Medical

Como um serviço gerenciado, o Amazon Comprehend Medical é protegido pelos procedimentos AWS globais de segurança de rede descritos no whitepaper [Amazon Web Services: Visão geral dos processos de segurança](#).

Para acessar o Amazon Comprehend Medical por meio da rede, você usa AWS chamadas de API publicadas. Os clientes devem oferecer suporte a Transport Layer Security (TLS) 1.0 ou posterior. Recomendamos usar o TLS 1.2 ou posterior. Os clientes também devem oferecer suporte a pacotes de criptografia com sigilo direto perfeito (PFS), como Ephemeral (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Diffie-Hellman A maioria dos sistemas modernos, como o Java 7 e versões posteriores, oferece suporte a esses modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID de chave de acesso e uma chave de acesso secreta associada a um principal AWS Identity and Access Management (IAM). Ou você pode usar o [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

## Diretrizes e cotas

Lembre-se das seguintes informações ao usar o Amazon Comprehend Medical.

### Note

- O Amazon Comprehend Medical é compatível com a codificação de caracteres em UTF-8 inglês (EN).
- O Amazon Comprehend Medical não permite caracteres sequenciais de barra (//) em caminhos de arquivo para trabalhos assíncronos.

## Aviso importante

O Amazon Comprehend Medical não é um substituto para aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico profissional. O Amazon Comprehend Medical fornece pontuações de confiança que indicam o nível de confiança na precisão das entidades detectadas. Identifique o limite de confiança certo para seu caso de uso e use limites de alta confiança em situações que exigem alta precisão. Para certos casos de uso, os resultados devem ser revisados e verificados por revisores humanos devidamente treinados. Use o Amazon Comprehend Medical somente em cenários de atendimento ao paciente depois que os resultados de precisão forem revisados e receber o parecer de profissionais médicos.

## Regiões compatíveis

Para obter uma lista de regiões da AWS onde o Amazon Comprehend Medical está disponível, consulte [Regiões e endpoints da AWS](#) na Referência geral da Amazon Web Services.

## Controle de utilização

Para obter informações sobre controle de utilização e cotas para o Amazon Comprehend Medical e para solicitar um aumento de cota, consulte [AWS Service Quotas](#).

# Cotas gerais

As operações de análise em tempo real (síncronas) do Amazon Comprehend Medical têm as seguintes cotas:

Recursos	Padrão
Transcrições por segundo (TPS) para as operações de detecção de entidades v2, detecção de entidades, detecção de entidades e infecções, infecções OCM	40 DICAS
Transcrições por segundo (TPS) para a operação	2 TPS

Recu	Padrão
Infe EDCT	
Carac s por segur (CPS para as opera Dete itie v2, Dete itie Dete , Infe im e Infe ØCM	40.000 CPS
Carac s por segur (CPS para a opera Infe EDCT	5.000 CPS

Recu	Padrão
Tamã	20
máxim	KB
do	
docur	
(cara	
es	
UTF- <i>i</i>	
para	
as	
opera	
Dete	
itie	
Dete	
itie	
v2	
e	
Dete	

Recu	Padrão
Tama máxim do docur (cara es UTF- para as opera Infe Ø- CM e Infe im	10 KB
Tama máxim do docur (cara es UTF- para a opera Infe EDCT	5 KB

As operações de análise em lote (assíncronas) do Amazon Comprehend Medical têm as seguintes cotas:

Descrição	Quota
Transações por segundo (TPS) para as operações <code>StartEntitiesDetectionV2Job</code> , <code>StartPHIDetectionJob</code> , <code>StopEntitiesDetectionV2Job</code> , <code>StopPHIDetectionJob</code> , <code>StartICD10CMInferenceJob</code> , <code>StartRxNormInferenceJob</code> , <code>StopICD10CMInferenceJob</code> , <code>StopRxNormInferenceJob</code> , <code>StartSNOMEDCTInferenceJob</code> e <code>StopSNOMEDCTInferenceJob</code>	5 TPS
Transações por segundo (TPS) para as operações <code>ListEntitiesDetectionV2Jobs</code> , <code>ListPHIDetectionJobs</code> , <code>DescribeEntitiesDetectionV2Job</code> , <code>DescribePHIDetectionJob</code> , <code>ListICD10CMInferenceJobs</code> , <code>ListRxNormInferenceJobs</code> , <code>DescribeICD10CMInferenceJob</code> , <code>DescribeRxNormInferenceJob</code> , <code>ListSNOMEDCTInferenceJobs</code> e <code>DescribeSNOMEDCTInferenceJob</code>	10 TPS
Tamanho máximo de arquivo individual para trabalhos em lote para todas as operações	70 KB
Número máximo de arquivos individuais em um trabalho em lotes	5000000
Tamanho máximo dos trabalhos em lote (soma total de todos os arquivos enviados em um trabalho em lote)	1 GB
Número máximo de trabalhos em lote ativos em execução para cada operação	10 trabalhos

Se seu texto for maior do que as cotas de caracteres, use [segment.py](#) para criar segmentos menores que possam ser analisados.

# Perguntas frequentes sobre protocolos compatíveis

[O serviço Amazon Comprehend Medical está adicionando suporte ao SDK para o protocolo Smithy RPC v2 CBOR, além do protocolo JSON existente.](#) O protocolo Smithy RPC v2 CBOR tem mais desempenho do que o JSON para a maioria das cargas de trabalho. Os SDKs priorizarão o protocolo com melhor desempenho para cada idioma.

## Quais são os AWS Protocolos JSON e Smithy RPC v2 CBOR, e como eles diferem?

Um protocolo eletrônico atua como um mediador entre o cliente e o serviço. O AWS SDK lida com a serialização (convertendo um objeto para o formato de conexão) e a desserialização (convertendo o formato de conexão de volta em um objeto) entre o cliente e o servidor de forma transparente para ambos os protocolos.

**AWS JSON** - JSON é um dos formatos de dados mais usados e aceitos para comunicação entre sistemas. Esse serviço usa AWS JSON como meio de comunicação entre um cliente AWS SDK e o servidor. Uma solicitação HTTP para uma operação de API de serviço aceita entradas na forma de JSON, a operação é executada e a resposta é retornada ao cliente SDK na forma de JSON.

**Smithy RPC v2 CBOR** - O Smithy RPC v2 CBOR (Concise Binary Object Representation) é um protocolo desenvolvido pela Amazon para uma transmissão de dados mais eficiente. É um formato de dados projetado para manter os tamanhos das mensagens compactos e permitir que o formato evolua sem exigir negociação de versão entre sistemas. A principal diferença do AWS JSON é que o AWS JSON usa texto legível por humanos (como `{"name": "John"}`), enquanto o Smithy RPC v2 CBOR usa um formato binário (sequências de 1s e 0s). Essa abordagem binária cria pacotes de dados menores que viajam mais depressa pela rede e reduzem o tempo de serialização, pois os computadores processam os dados binários diretamente.

## Como faço para começar a usar o protocolo Smithy RPC v2 CBOR?

Para começar, use a AWS SDK/CLI versão mais recente para usar o protocolo Smithy RPC v2 CBOR para esse serviço. O SDK usará automaticamente o protocolo Smithy RPC v2 CBOR quando disponível. Atualize seu AWS SDK para a versão especificada ou qualquer versão posterior.

A partir de 16/04/2020, os seguintes AWS SDKs usarão o protocolo Smithy RPC v2 CBOR, enquanto os outros SDKs continuarão usando o protocolo JSON: AWS

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go V2
- AWS SDK para Java 2.x
- AWS SDK para .NET v4
- AWS Ferramentas para PowerShell v5
- AWS SDK para Swift
- AWS SDK para Kotlin

## Quais são os riscos de ativar o protocolo Smithy RPC v2 CBOR?

Espera-se que o suporte adicional do Smithy RPC v2 CBOR nos SDKs seja totalmente transparente e fácil para os clientes. No entanto, se você estiver usando uma implementação personalizada do AWS SDK, ou uma combinação de clientes personalizados e do AWS SDK, que depende do comportamento de AWS JSON-specific serialização, ela pode ser incompatível com o protocolo CBOR Smithy RPC v2.

## E se minha solução não for compatível com o Smithy RPC v2 CBOR?

Para usar o protocolo AWS JSON, faça o downgrade do SDK para uma versão lançada antes de 16/04/2026.

## O que AWS As regiões oferecem suporte ao protocolo Smithy RPC v2 CBOR?

O protocolo Smithy RPC v2 CBOR é suportado em todas as [AWS regiões](#) em que esse serviço está disponível.

## Quais melhorias de latência posso esperar ao atualizar para versões do SDK compatíveis com o Smithy RPC v2 CBOR?

O Smithy RPC v2 CBOR fornece até 13% menos latência e até 15% de redução no tamanho da carga útil em comparação com o JSON. A codificação binária elimina a sobrecarga da análise de texto JSON e do escape de cadeias de caracteres, o que reduz o tempo de transferência de rede e o custo de serialização.

## Será que o AWS O protocolo JSON está obsoleto?

O AWS O protocolo JSON continuará sendo suportado por meio de versões mais antigas dos SDKs. Além disso, alguns SDKs específicos da linguagem continuarão usando o AWS JSON, pois ele tem mais desempenho do que o Smithy RPC v2 CBOR, pois a implementação de JSON disponível para a linguagem é mais rápida do que a implementação do CBOR.

## Onde posso encontrar mais informações sobre o Smithy RPC v2 CBOR?

[Você pode encontrar mais informações sobre o protocolo JSON no protocolo AWS JSON 1.0 e no protocolo AWS JSON 1.1 na documentação do Smithy, e sobre o Smithy RPC v2 CBOR no protocolo Smithy RPC v2 CBOR na documentação do Smithy.](#)

# Histórico da documentação do Amazon Comprehend Medical

A tabela a seguir descreve a documentação desta versão do Amazon Comprehend Medical.

Alteração	Descrição	Data
<a href="#">Página de perguntas frequentes adicionada para protocolos suportados</a>	Foi adicionada uma nova página de perguntas frequentes com respostas a perguntas comuns sobre os protocolos de AWS conexão JSON e Smithy RPC v2 CBOR. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Perguntas frequentes sobre protocolos compatíveis</a> .	16 de abril de 2026
<a href="#">Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação InferSNOMEDCT da API agora usa a versão 3.3.0.20220301.	19 de março de 2026
<a href="#">Versão atualizada da API para InferRxNorm</a>	A operação InferRxNorm da API agora usa a versão 3.3.0.20221107.	19 de março de 2026
<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação InferICD10CM da API agora usa a versão 3.3.0.20251001.	19 de março de 2026
<a href="#">Versão atualizada da API para DetectEntities V2</a>	A operação DetectEntitiesV2 da API agora usa a versão 3.3.0.	19 de março de 2026
<a href="#">Versão atualizada da API para DetectEntities</a>	A operação DetectEntities da API agora usa a versão 3.3.0.	19 de março de 2026

<a href="#">Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação InferSNOMEDCT da API agora usa a versão 3.2.0.20220301 .	3 de novembro de 2025
<a href="#">Versão atualizada da API para InferRxNorm</a>	A operação InferRxNorm da API agora usa a versão 3.2.0.20221107 .	3 de novembro de 2025
<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação InferICD10CM da API agora usa a versão 3.2.0.20251001 .	3 de novembro de 2025
<a href="#">Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação InferSNOMEDCT da API agora usa a versão 3.1.0.20220301 .	5 de agosto de 2025
<a href="#">Versão atualizada da API para InferRxNorm</a>	A operação InferRxNorm da API agora usa a versão 3.1.0.20221107 .	5 de agosto de 2025
<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação InferICD10CM da API agora usa a versão 3.1.0.20250401 .	5 de agosto de 2025
<a href="#">Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação InferSNOMEDCT da API agora usa a versão 3.0.0.20220301 .	26 de junho de 2024
<a href="#">Versão atualizada da API para InferRxNorm</a>	A operação InferRxNorm da API agora usa a versão 3.0.0.20221107 .	26 de junho de 2024
<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação InferICD10CM da API agora usa a versão 3.0.0.20231001 .	26 de junho de 2024
<a href="#">Versão atualizada da API para DetectEntities V2</a>	A operação DetectEntitiesV2 da API agora usa a versão 3.0.0.	26 de junho de 2024

<a href="#">Versão atualizada da API para DetectEntities</a>	A operação DetectEntities da API agora usa a versão 3.0.0.	26 de junho de 2024
<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação da API InferICD10CM agora usa a versão 2.7.0.20231001 .	7 de fevereiro de 2024
<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação da API InferICD10CM agora usa a versão 2.6.0.20220401 .	27 de setembro de 2023
<a href="#">Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação da API InferSNOMEDCT agora usa 3.3.0.20220301 .	12 de junho de 2023
<a href="#">Nova característica e atributo adicionados para DetectEntities V2</a>	A operação da API DetectEntitiesV2 agora usa a versão 3.3.0. Essa atualização adiciona novas características e atributos.	12 de junho de 2023
<a href="#">Nova característica e atributo adicionados para DetectEntities</a>	A operação da API DetectEntities agora usa a versão 3.3.0. Essa atualização adiciona novas características e atributos.	12 de junho de 2023
<a href="#">Nova característica adicionada ao InferRxNorm</a>	A operação da API InferRxNorm agora usa a versão 3.3.0.20221107 . Essa atualização adiciona a característica PAST_HISTORY aos medicamentos detectados.	12 de junho de 2023

<a href="#">Novo atributo adicionado a InferICD10CM</a>	A operação da API InferICD10CM agora usa a versão 2.5.0.20220401 . Essa atualização adiciona o atributo QUALITY à categoria de condição médica.	12 de junho de 2023
<a href="#">Versão atualizada da API para InferRxNorm</a>	A operação da API InferRxNorm agora usa a versão 2.1.0.20221003 . Essa atualização melhora o desempenho do InferRxNorm modelo.	28 de abril de 2023
<a href="#">Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação da API InferSNOMEDCT agora usa 2.5.0.20220301 . Essa atualização melhora o desempenho do modelo.	21 de abril de 2023
<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação da API InferICD10CM agora usa a versão 2.4.0.20220401 . Essa atualização melhora a detecção da entidade DX_NAME e dos atributos DIRECTION .	17 de março de 2023
<a href="#">Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação da API InferSNOMEDCT agora usa a versão 2.4.0.20220301 . Essa atualização melhora a detecção de conceitos de cardiologia nas categorias TEST_TREATMENT_PROCEDURE e MEDICAL_CONDITION .	15 de março de 2023

<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação da API InferICD10CM agora usa a versão 2.3.0.20220401 . Essa atualização melhora a detecção de conceitos de cardiologia na categoria MEDICAL_CONDITION .	15 de março de 2023
<a href="#">Versão atualizada da API para DetectEntities V2</a>	A operação da API DetectEntitiesV2 agora usa a versão 2.3.0. Essa atualização melhora a detecção de conceitos de cardiologia nas categorias TEST_TREATMENT_PROCEDURE e MEDICAL_CONDITION .	15 de março de 2023
<a href="#">Versão atualizada da API para DetectEntities</a>	A operação da API DetectEntities agora usa a versão 0.6.0. Essa atualização melhora a detecção de conceitos de cardiologia nas categorias TEST_TREATMENT_PROCEDURE e MEDICAL_CONDITION .	15 de março de 2023
<a href="#">Atualizar a versão da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação da API InferSNOMEDCT agora usa a versão 2.3.0.20220301 . Essa atualização melhora a detecção de negações ao usar a operação da API InferenceDCT.	8 de fevereiro de 2023

[Atualizar a versão da API para InferICD10CM](#)

A operação da API InferICD10CM agora usa a versão 2.2.0.20220401 . Essa atualização melhora a detecção de negações ao usar a operação da API InfericD10CM.

8 de fevereiro de 2023

[Atualize a versão da API para DetectEntities V2](#)

A operação da API DetectEntitiesV2 agora usa a versão 2.2.0. Essa atualização melhora a detecção de negações ao usar a operação da API DetectEntities V2.

8 de fevereiro de 2023

[Atualize a versão da API para DetectEntities](#)

A operação da API DetectEntities agora usa a versão 0.5.0. Essa atualização melhora a detecção de negações ao usar a operação da DetectEntities API.

8 de fevereiro de 2023

[Atualizar a versão da API para InferSNOMEDCT](#)

A operação da API InferSNOMEDCT agora usa a versão 2.2.0.20220301 . Essa atualização corrige um bug que impedia que o conjunto total de atributos identificados fosse retornado na saída da API.

9 de dezembro de 2022

<a href="#">Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação da API InferSNOMEDCT agora usa a versão 2.1.0.20220301 . Essa atualização inclui melhorias na precisão, e novas características são detectadas.	16 de novembro de 2022
<a href="#">Versão atualizada da API para InferRxNorm</a>	A operação da API InferRxNorm agora usa a versão 2.1.0.20221003. Essa atualização corrige um bug que impedia que o conjunto total de atributos identificados fosse retornado.	16 de novembro de 2022
<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação da API InferICD10CM agora usa a versão 2.1.0.20220401 . Essa atualização inclui melhorias na precisão, e novas características são detectadas.	16 de novembro de 2022
<a href="#">Versão atualizada da API para DetectEntities V2</a>	A operação da API DetectEntitiesV2 agora usa a versão 2.1.0. Essa atualização inclui melhorias na precisão. Ele também adiciona novas entidades, atributos , relacionamentos, características e uma nova categoria.	16 de novembro de 2022

<a href="#">Versão atualizada da API para DetectEntities</a>	A operação da API DetectEntities agora usa a versão 0.4.0. Essa atualização inclui melhorias na precisão, e novas características são detectadas.	16 de novembro de 2022
<a href="#">Limites atualizados para StartSNOMEDCTInferenceJob e InferSNOMEDCT</a>	Os tamanhos máximos de arquivos individuais StartSNOMEDCTInferenceJob e as operações da API InferSNOMEDCT agora são de 5 KB.	22 de setembro de 2022
<a href="#">Atualização de processamento de texto</a>	O Amazon Comprehend Medical agora fornece suporte aprimorado para analisar corretamente espaços em branco não relevantes e CRs em todas as operações da API de análise de texto.	12 de setembro de 2022
<a href="#">Atualização de processamento de texto</a>	O Amazon Comprehend Medical agora fornece suporte aprimorado para analisar corretamente espaços em branco não relevantes e CRs em todas as operações da API de ontologia.	12 de setembro de 2022
<a href="#">Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT</a>	A operação da API Amazon Comprehend Medical InferSNOMEDCT agora usa a versão 1.1.0.20220301.	8 de julho de 2022

---

<a href="#">Versão atualizada da API para InferICD10CM</a>	A operação da API Amazon Comprehend Medical InferICD10CM agora usa a versão 1.1.0.20220401.	8 de julho de 2022
<a href="#">Versão atualizada da API para InferRxNorm operação no Amazon Comprehend Medical</a>	O Amazon Comprehend Medical agora usa o RxNorm 2022-03-07 e a versão para cada RxCUI. RxTerms	29 de junho de 2022
<a href="#">Modelos atualizados do Amazon Comprehend Medical</a>	O Amazon Comprehend Medical agora fornece suporte aprimorado para detecção de NEGATION características usando o Detect Entities V2.	25 de abril de 2022
<a href="#">Novo atributo do Amazon Comprehend Medical</a>	Você já pode usar o Amazon Comprehend Medical para estabelecer uma conexão privada entre a nuvem privada virtual (VPC) criando um endpoint da VPC de interface . Para obter mais informações, consulte <a href="#">VPC endpoints</a> (). PrivateLink	13 de junho de 2021

## [Novo atributo do Amazon Comprehend Medical](#)

O Amazon Comprehend Medical agora fornece operações em lote para vinculação de ontologias. Isso permite que o serviço detecte entidades em textos médicos armazenados em um bucket do S3 e vincule essas entidades a ontologias padronizadas. Para obter mais informações, consulte [Análise em lote de vinculações de ontologias](#).

4 de maio de 2020

## [Novo atributo do Amazon Comprehend Medical](#)

Agora você pode usar o Amazon Comprehend Medical para extrair e relacionar a expressão de data ou hora a qualquer entidade atualmente detectada pelo Amazon Comprehend Medical. Para obter mais informações, consulte [Detectar entidades versão 2](#).

2 de março de 2020

## [Novos recursos](#)

O Amazon Comprehend Medical agora detecta medicamentos e condições médicas e vincula as entidades a ontologias nacionais estabelecidas e RxNorm ICD-10-CMs. Para obter mais informações, consulte [APIs de vinculações de ontologias](#).

16 de dezembro de 2019

### Novo atributo

O Amazon Comprehend Medical agora fornece operações em lote para que você possa processar textos médicos armazenados em um bucket do S3. Ele também fornece um novo modelo que você pode usar para examinar seu texto médico. Para obter mais informações, consulte [Detectar entidades versão 2](#).

24 de setembro de 2019

### Novo atributo importante

O Amazon Comprehend Medical é um novo serviço que detecta informações úteis em textos clínicos não estruturados: anotações médicas, resumos de alta, resultados de exames, notas de casos e assim por diante. O Amazon Comprehend Medical usa modelos de processamento de linguagem natural (PLN) para utilizar os últimos avanços em machine learning para classificar essa enorme quantidade de dados e recuperar informações valiosas que, de outra forma, seriam difíceis de recuperar e usar sem um esforço manual significativo. Para obter mais informações, consulte [Amazon Comprehend Medical](#).

27 de novembro de 2018

# Log de alterações do Amazon Comprehend Medical

As seções a seguir detalham as atualizações do serviço Amazon Comprehend Medical.

## Versão atualizada da API para DetectEntities V2

Data de lançamento: 2026-03-19

Tipo: automático

A operação da API DetectEntities V2 agora usa a versão do 3.3.0 modelo.

## Versão atualizada da API para DetectEntities

Data de lançamento: 2026-03-19

Tipo: automático

A operação DetectEntities da API agora usa a versão do modelo 3.3.0.

## Versão atualizada da API para InferICD10CM

Data de lançamento: 2026-03-19

Tipo: automático

A operação da API InfericD10cm agora usa a versão do modelo 3.3.0.20251001

## Versão atualizada da API para InferRxNorm

Data de lançamento: 2026-03-19

Tipo: automático

A operação InferRxNorm da API agora usa a versão do modelo 3.3.0.20221107.

## Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT

Data de lançamento: 2026-03-19

Tipo: automático

A operação da API `InferNomeDCT` agora usa a versão do modelo. `3.3.0.20220301`

## Versão atualizada da API para `InferICD10CM`

Data de lançamento: 2025-11-03

Tipo: automático

A operação da API `InferICD10cm` agora usa a versão do modelo. `3.2.0.20251001` Esta atualização introduz suporte para o recém-lançado conjunto de códigos 2026 ICD10CM que entrou em vigor em 1º de outubro de 2025.

## Versão atualizada da API para `InferRxNorm`

Data de lançamento: 2025-11-03

Tipo: automático

A operação `InferRxNorm` da API agora usa a versão do modelo `3.2.0.20221107`.

## Versão atualizada da API para `InferSNOMEDCT`

Data de lançamento: 2025-11-03

Tipo: automático

A operação `InferSNOMEDCT` da API agora usa a versão do modelo `3.2.0.20220301`.

## Versão atualizada da API para `InferICD10CM`

Data de lançamento: 2025-08-05

Tipo: automático

A operação da API `InferICD10cm` agora usa a versão do modelo. `3.1.0.20250401` Esta atualização introduz suporte para o recém-lançado conjunto de códigos ICD10CM 2025 que entrou em vigor em 1º de abril de 2025.

## Versão atualizada da API para `InferRxNorm`

Data de lançamento: 2025-08-05

Tipo: automático

A operação InferRxNorm da API agora usa a versão do modelo 3.1.0.20221107.

## Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT

Data de lançamento: 2025-08-05

Tipo: automático

A operação InferSNOMEDCT da API agora usa a versão do modelo 3.1.0.20220301.

## Versão atualizada da API para DetectEntities

Data de lançamento: 2024-06-26

Tipo: automático

A operação DetectEntities da API agora usa a versão do modelo 3.0.0.

## Versão atualizada da API para DetectEntities V2

Data de lançamento: 2024-06-26

Tipo: automático

A operação DetectEntitiesV2 da API agora usa a versão do modelo 3.0.0.

## Versão atualizada da API para InferRxNorm

Data de lançamento: 2024-06-26

Tipo: automático

A operação InferRxNorm da API agora usa a versão do modelo 3.0.0.20221107.

## Versão atualizada da API para InferSNOMEDCT

Data de lançamento: 2024-06-26

Tipo: automático

A operação InferSNOMEDCT da API agora usa a versão do modelo 3.0.0.20220301.

## Versão atualizada da API para InferICD10CM

Data de lançamento: 2024-06-26

Tipo: automático

A operação InferICD10CM da API agora usa a versão do modelo 3.0.0.20231001.

## Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical

Data de lançamento: 2024-02-07

Tipo: automático

Nesta atualização, a operação da API InferICD10CM foi atualizada. A operação da API InfericD10cm agora usa a versão do modelo 2.7.0.20231001 Esta atualização introduz suporte para o recém-lançado conjunto de códigos 2024 ICD10CM que entrou em vigor em 1º de outubro de 2023. Essa atualização também melhora a precisão geral do modelo.

## Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical

Data do lançamento: 27-09-2023

Tipo: automático

Nesta atualização, a operação da API InferICD10CM foi atualizada para usar o modelo versão 2.6.0.20220401. Essa atualização melhora as pontuações de baixa confiança e a precisão do modelo.

## Mudanças na operação da API Amazon Comprehend Medical

Data do lançamento: 06-12-2023

Tipo: automático

Nesta atualização, as seguintes operações de API agora usam uma nova versão do modelo.

- DetectEntities agora usa a versão do modelo 3.3.0.
- DetectEntitiesA V2 agora usa a versão 3.3.0 do modelo.
- InferRxNorm agora usa a versão do modelo 3.3.0.20221107.
- O InferICD10CM agora usa a versão do modelo 2.5.0.20220401.

- O InfersNomeDCT agora usa a versão do modelo 3.3.0.20220301.

Esta atualização adiciona a característica PAST\_HISTORY à categoria de medicamento nas operações DetectEntities, InferRxNorm e DetectEntitiesV2 da API.

Essa atualização adiciona o atributo QUALITY à categoria de condição médica em DetectEntitiesV2, DetectEntities e InferICD10CM.

Para saber mais sobre as operações da API de análise de texto do Amazon Comprehend Medical, consulte [Operações de API de análise de texto](#).

Para saber mais sobre a ontologia do Amazon Comprehend Medical que vincula operações de API, consulte. [Vinculação de ontologias](#)

## Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical

Data do lançamento: 28-04-2023

Tipo: automático

Nesta atualização, as operações InferRxNorm da API foram atualizadas. A operação da InferRxNorm API agora usa a versão do modelo 2.1.0.20221003. Essa atualização melhora o desempenho do modelo.

## Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical

Data do lançamento: 21-04-2023

Tipo: automático

Nesta atualização, a operação InferSNOMEDCT API foi atualizada. A operação InferSNOMEDCT API agora usa a versão 2.5.0.20220301. Essa atualização melhora o desempenho do modelo.

## Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical

Data do lançamento: 17-03-2023

Tipo: automático

Nesta atualização, a operação da API InferICD10CM foi atualizada. Essa atualização melhora a detecção da entidade DX\_NAME e dos atributos DIRECTION. Ele também faz um pequeno ajuste

no processamento do sistema que afeta a detecção de características e atributos e as frequency/confidence pontuações na saída da API.

## Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical

Data do lançamento: 15-03-2023

Tipo: automático

Nessa atualização, as seguintes operações da API Amazon Comprehend Medical foram atualizadas: `InferSNOMEDCT`, `InferICD10CM`, `DetectEntities` e `DetectEntitiesV2`. Essas atualizações são automáticas e melhoram a detecção de condições médicas, exames, tratamentos e procedimentos, junto com atributos e características relacionados, dentro da especialidade de cardiologia.

## Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical

Data do lançamento: 08-02-2023

Tipo: automático

Nessa atualização, as seguintes operações da API Amazon Comprehend Medical foram atualizadas: `InferSNOMEDCT`, `InferICD10CM`, `DetectEntities` e `DetectEntitiesV2`. Essas atualizações são automáticas e melhoram a detecção de negações em condições médicas ao digitalizar textos clínicos.

## Mudanças nas operações da API InferSNOMEDCT do Amazon Comprehend Medical

Data do lançamento: 09-12-2022

Tipo: automático

A operação da API do Amazon Comprehend Medical, `InferSNOMEDCT` foi atualizada para usar a versão `2.2.0.20220301`. Essa atualização corrige um bug que impedia que o conjunto total de atributos identificados fosse retornado.

A análise em lote realizada usando a operação da API `StartSNOMEDCTInferenceJob` usa a mesma versão da API, `2.2.0.20220301`. Para saber mais sobre como usar essas operações da API, consulte [Vinculação do SNOMED CT](#).

# Mudanças nas operações da API Amazon Comprehend Medical

Data do lançamento: 16-11-2022

Tipo: automático

Nessa atualização, as seguintes operações da API do Amazon Comprehend Medical foram atualizadas: `InferSNOMEDCT`, `InferICD10CM`, `DetectEntities` e `DetectEntitiesV2`

## **DetectEntities**

A operação `DetectEntities` da API do Amazon Comprehend Medical agora usa a versão da API 0.4.0. Essa atualização inclui melhorias na precisão, e novas características são detectadas.

Para Categoria: `TEST_TREATMENT_PROCEDURE`, Tipo: `PROCEDURE_NAME`, as seguintes características são adicionadas.

- `NEGATION`
- `PAST_HISTORY`
- `HYPOTHETICAL`
- `FUTURE`

Para Categoria: `TEST_TREATMENT_PROCEDURE`, Tipo: `TEST_NAME`, as seguintes características são adicionadas.

- `PAST_HISTORY`
- `HYPOTHETICAL`
- `FUTURE`

Para Categoria: `TEST_TREATMENT_PROCEDURE`, Tipo: `TREATMENT_NAME`, as seguintes características são adicionadas.

- `NEGAÇÃO`
- `PAST_HISTORY`
- `HYPOTHETICAL`
- `FUTURE`

Para Categoria: `MEDICAL_CONDITION`, Tipo: `DX_NAME`, as seguintes características são adicionadas.

- `HYPOTHETICAL`

- LOW\_CONFIDENCE
- PERTAINS\_TO\_FAMILY

## **DetectEntitiesV2**

A operação DetectEntitiesV2 da API do Amazon Comprehend Medical agora usa a versão da API 2.1.0. A atualização inclui uma nova categoria BEHAVIORAL\_ENVIRONMENTAL\_SOCIAL junto com atualizações nas categorias e características existentes.

Para a nova categoria: BEHAVIORAL\_ENVIRONMENTAL\_SOCIAL, os seguintes tipos foram adicionados: GENDER, RACE\_ETHNICITY, ALLERGIES, TOBACCO\_USE, ALCOHOL\_CONSUMPTION, REC\_DRUG\_USE, UnmappedAttributes.

Para Tipo: GENDER

- Não há nenhum atributo ou característica disponível.

Para Tipo: RACE\_ETHNICITY

- Não há nenhum atributo ou característica disponível.

Para Tipo: ALLERGIES, as seguintes características são adicionadas.

- NEGATION
- PAST\_HISTORY

Para Tipo: TOBACCO\_USE, os seguintes atributos e características são adicionados.

- Atributos
  - AMOUNT
  - DURATION
  - FREQUENCY
- Característica
  - NEGATION
  - PAST\_HISTORY

Para Tipo: ALCOHOL\_CONSUMPTION, os seguintes atributos e características são adicionados.

- Atributos
  - AMOUNT
  - DURATION
  - FREQUENCY

- Característica
  - NEGATION
  - PAST\_HISTORY

Para Tipo:REC\_DRUG\_USE, os seguintes atributos e características são adicionados.

- Atributos
  - AMOUNT
  - DURATION
  - FREQUENCY
- Característica
  - NEGATION
  - PAST\_HISTORY

Para Tipo: UnmappedAttributes, o seguinte atributo é adicionado.

- AMOUNT

Para Categoria:MEDICAL\_CONDITION, Tipo:DX\_NAME, as seguintes características são adicionadas.

- PERTAINS\_TO\_FAMILY
- HYPOTHETICAL
- LOW\_CONFIDENCE

Para Categoria:TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE, Tipo:PROCEDURE\_NAME, as seguintes características são adicionadas.

- NEGATION
- PAST\_HISTORY
- HYPOTHETICAL
- FUTURE

Para Categoria:TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE, Tipo:TEST\_NAME, as seguintes características são adicionadas.

- PAST\_HISTORY
- HYPOTHETICAL
- FUTURE

Para Categoria:TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE, Tipo:TREATMENT\_NAME, as seguintes características são adicionadas.

- NEGATION
- PAST\_HISTORY
- HYPOTHETICAL
- FUTURE

A análise em lote realizada usando a operação da API StartEntitiesDetectionV2Job usa a mesma versão da API, 2.1.0. Para saber mais sobre como usar essas operações da API, consulte [Detectar entidades \(versão 2\)](#).

## InferSNOMEDCT

A operação InferSNOMEDCT da API do Amazon Comprehend Medical agora usa a versão da API 2.1.0.20220301. Esta atualização de versão adiciona novas características às seguintes categorias e tipos.

Para Categoria:MEDICAL\_CONDITION, Tipo:DX\_NAME, as seguintes características são adicionadas.

- PERTAINS\_TO\_FAMILY
- HYPOTHETICAL
- LOW\_CONFIDENCE

Para Categoria:TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE, Tipo:TEST\_NAME, as seguintes características são adicionadas.

- PAST\_HISTORY
- FUTURE
- HYPOTHETICAL

Para Categoria:TEST\_TREATMENT\_PROCEDURE, Tipo:TREATMENT\_NAME, as seguintes características são adicionadas.

- NEGATION
- PAST\_HISTORY
- FUTURE
- HYPOTHETICAL

Correções de erros

- Essa atualização corrige um bug que impedia que o conjunto total de atributos identificados fosse retornado.

A análise em lote realizada usando a operação da API `StartSNOMEDCTInferenceJob` usa a mesma versão. Para saber mais sobre como usar essas operações da API, consulte [Vinculação do SNOMED CT](#).

## InferICD10CM

A operação `InferICD10CM` da API do Amazon Comprehend Medical agora usa a versão da 2.1.0.20220401. Esta atualização de versão adiciona novas características às seguintes categorias e tipos.

Para Categoria:`MEDICAL_CONDITION`, Tipo:`DX_NAME`, as seguintes características são adicionadas.

- `PERTAINS_TO_FAMILY`
- `HYPOTHETICAL`
- `LOW_CONFIDENCE`

Correções de erros

- Essa atualização corrige um bug que impedia que o conjunto total de atributos identificados fosse retornado.

A análise em lote realizada usando a operação da API `StartRxNormInferenceJob` usa a mesma versão. Para saber mais sobre como usar as operações `InferRxNorm` e `StartRxNormInferenceJob` da API, consulte [RxNorm vinculando](#).

## InferRxNorm

A operação da API Amazon Comprehend Medical `InferRxNorm` agora usa a versão da API. 1.3.1.20221003

Correções de erros

- Essa atualização corrige um bug que impedia que o conjunto total de atributos identificados fosse retornado.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.